

Inspected Dimensions:
Folded width: 5-1/2" (14 cm)
Folded length: 7-1/2" (19 cm)

ARROW®

Peripherally Inserted Trimmable Central Venous Catheter Product with Placement Wire

Safety and Efficacy Considerations:

Do not use if package has been previously opened or damaged. **Warning: Prior to use read all package insert warnings, precautions, and instructions. Failure to do so may result in severe patient injury or death.**

Do not alter the catheter or any other kit/set component during insertion, use or removal except as instructed.

Procedure must be performed by trained personnel well versed in anatomical landmarks, safe technique and potential complications.

Warning: Do not place the catheter into or allow it to remain in the right atrium or right ventricle (refer to Fig. 1)

practice^{1,2,4,5,7,17,18} that may lead to cardiac perforation and tamponade.^{1,2,4,5,17,18} Although cardiac tamponade secondary to pericardial effusion is uncommon, there is a high mortality rate associated with it.²¹ Practitioners placing central venous catheters must be aware of this potentially fatal complication before advancing the catheter too far relative to patient size. No particular route or catheter type is exempt from this potentially fatal complication.¹⁸ The actual position of the tip of the indwelling catheter should be confirmed by x-ray after insertion.^{1,2,5,17,18,22} Central venous catheters should be placed in the superior vena cava^{1,2,4,5,7,17,23} above its junction with the right atrium and parallel to the vessel wall^{10,23} and its distal tip positioned at a level above either the azygos vein or the carina of the trachea, whichever is better visualized. Central venous catheters should not be placed in the right atrium unless specifically required for special relatively short term procedures such as aspiration of air emboli during neurosurgery. Such procedures are, nevertheless, risk prone and should be closely monitored and controlled.

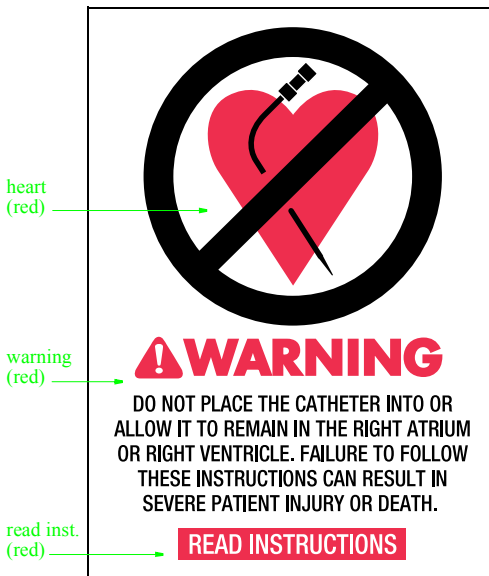


Fig. 1

Cardiac Tamponade: It has been documented by many authors that placement of indwelling catheters in the right atrium is a dangerous

Indications for Use:

A Peripherally Inserted Central Venous Catheter permits venous access to the central circulation through a peripheral vein. It offers an alternative method of intravenous therapy for select adult and pediatric patients.

Contraindications:

None known.

Warnings and Precautions:*

- Warning: Sterile, Single use: Do not reuse, reprocess or resterilize. Reuse of device creates a potential risk of serious injury and/or infection which may lead to death.**
- Warning: Do not place the catheter into or allow it to remain in the right atrium or right ventricle. Central vein catheters should be positioned so that the distal tip of the catheter is in the superior vena cava (SVC) above the junction of the SVC and the right atrium and lies parallel to the vessel wall.**
- Warning: Practitioners must be aware of complications associated with central vein**

catheters including cardiac tamponade secondary to vessel wall, atrial or ventricular perforation, pleural and mediastinal injuries, air embolism, catheter embolism, thoracic duct laceration, bacteremia, septicemia, thrombosis, inadvertent arterial puncture, nerve damage, hematoma, hemorrhage and dysrhythmias.

4. **Warning:** Do not apply excessive force in placing or removing catheter. If placement or withdrawal cannot be easily accomplished, an x-ray should be obtained and further consultation requested.
5. **Warning:** The practitioner must be aware of potential air embolism associated with leaving open needles or catheters in central venous puncture sites or as a consequence of inadvertent disconnects. To lessen the risk of air embolism, only securely tightened Luer-Lock connections should be used with this device. Follow hospital/agency protocol to guard against air embolism for all catheter maintenance.
6. **Warning:** The practitioner must be aware of clinical conditions that may limit the use of PIC catheters such as: dermatitis, cellulitis and burns at or about the insertion site, previous ipsilateral venous thrombosis, radiation therapy, contractures, mastectomy, and potential use for AV fistula.
7. **Warning:** To minimize the risk of damage to the catheter if the placement wire is removed prior to catheter insertion, do not attempt to reinsert the placement wire.
8. **Warning:** Due to the risk of exposure to HIV (Human Immunodeficiency Virus) or other blood borne pathogens, health care workers should routinely use universal blood and body-fluid precautions in the care of all patients.
9. **Precaution:** Indwelling catheters should be routinely inspected for desired flow rate, security of dressing, correct catheter position and for secure Luer-Lock connection. Use centimeter markings to identify if the catheter position has changed.
10. **Precaution:** Only x-ray examination of the catheter placement can ensure that the catheter tip has not entered the heart or no longer lies parallel to the vessel wall. If catheter position has changed, immediately perform x-ray examination to confirm catheter tip position.
11. **Precaution:** Alcohol and acetone can weaken the structure of polyurethane materials. Check ingredients of prep sprays and swabs for acetone and alcohol content.

Acetone: Do not use acetone on catheter surface.

Acetone may be applied to skin but must be allowed to dry completely prior to applying dressing.

Alcohol: Do not use alcohol to soak catheter surface or to restore catheter patency. Care should be taken when instilling drugs containing high concentration of alcohol. Always allow alcohol to dry completely prior to applying dressing.

These agents may also weaken the adhesive bond between the StatLock® Anchoring Device and skin.

12. **Precaution:** Some disinfectants used at the catheter insertion site contain solvents, which can attack the catheter material. Assure insertion site is dry before dressing.
13. **Precaution:** The indications for use in children are the same as adults; however, insertion techniques are often modified according to the age and size of a child. If the practitioner is inexperienced in utilizing this product in a child, appropriate consultation should be sought.
14. **Precaution:** When catheter is placed with distal end located in a vessel proximal to the SVC (midclavicular or midline), practitioners must be aware of the risk of chemically induced thrombophlebitis.¹¹ When administering > 10% glucose solution/total parenteral nutrition, any medication with an osmolarity above 600 mOsm/liter, medications with an osmolarity between 400 and 600 mOsm/liter for more than 4 weeks, or any medication known to be irritating to vessels proximal to the vena cava, the catheter tip must be located in the central circulation.¹⁹
15. **Precaution:** To minimize the risk of pressure induced damage to catheter, do not expose to pressures above 50 psi. Common sources of potentially high pressure include: syringes smaller than 10 cc used to irrigate or declot an occluded catheter (a fluid filled 1 cc syringe can exceed 300 psi⁶), certain radiographic procedures, and infusion pumps with occlusion pressure limits above 50 psi.
16. **Precaution:** The StatLock® Anchoring Device should be routinely inspected for adherence to the skin and connection to the catheter. At the same time, the catheter position should be checked using the centimeter marks on the catheter body.

A Suggested Procedure: Use sterile technique.

1. Verify physician order. Physician order must include post-placement chest x-ray.
2. Explain procedure to patient. Have informed consent signed as required.

- Measure and record upper arm circumference.
- Utilizing tourniquet as necessary, identify appropriate vein for insertion.
Adult: PIC catheters are typically inserted into basilic, median cubital or cephalic veins (refer to Fig. 2).

Pediatric: PIC catheters are typically inserted into basilic, cephalic, scalp veins or saphenous veins.⁹ The most suitable vein depends on size and maturity of child.

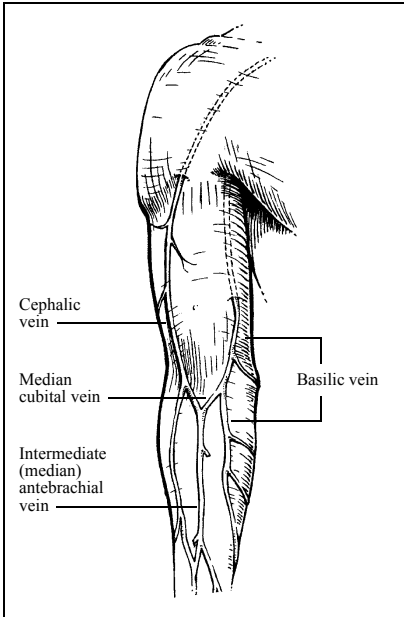


Fig. 2

- Release tourniquet leaving in place beneath arm.
- Measure patient to determine length of catheter required to place distal tip in SVC.
Adult: Extend arm approximately 45 to 90 degrees from trunk. Measure distance from insertion site along presumed anatomical course of vessel to be catheterized. Catheter tip should lie in distal one-third of SVC above right atrium and parallel to SVC wall. If a StatLock® Anchoring Device will be used, add 1 to 1-1/2 inches (2.5 to 3.8 cm) to catheter measurement.
Pediatric: Measure distance from insertion site along presumed anatomical course of vessel to be catheterized. Catheter tip should lie in distal one-third of SVC above right atrium and parallel to

SVC wall. When insertion site is saphenous vein, catheter tip should lie in distal one-third of inferior vena cava (IVC) below right atrium and parallel to IVC wall. If a StatLock® Anchoring Device will be used, add 1 to 1-1/2 inches (2.5 to 3.8 cm) to catheter measurement.

- Position patient for insertion.
Adult: Position patient as appropriate for insertion site. Extend arm laterally 45 to 90 degrees from trunk.
Pediatric: Position patient as appropriate for insertion site.
- Perform surgical scrub. Dress in protective clothing (mask, goggles, sterile gown, sterile gloves, hair cover).
- Prepare venipuncture site utilizing appropriate antiseptics.
- Perform a skin wheal with a local anesthetic as needed. In kits where provided, a SharpsAway® disposal cup is used for disposal of needles. Push needles into foam after use. Discard entire cup at completion of procedure. **Precaution: Do not reuse needles after they have been placed into disposal cup. Particulate matter may adhere to needle tip.**
- Prepare all equipment. Remove catheter tip protector. Retract placement wire approximately 1 to 1-1/2 inches (2.5 - 3.8 cm) from where catheter is to be cut. **Warning: Do not cut placement wire.** Kink proximal end of placement wire at connector with sideport. This minimizes risk of placement wire extending beyond distal tip of catheter during insertion.^{14,15} Peel back contamination guard exposing catheter portion to be trimmed. Using trimming device, cut catheter straight across (90° to catheter cross-section) to maintain a blunt tip.
- Attach syringe to sidearm and flush distal lumen with sterile saline solution. Leave syringe in place. Place catheter on sterile field.
- Reapply tourniquet and replace sterile gloves.
- Drape site for maximal barrier protection.
- Using peel-away sheath over needle, perform venipuncture. When flashback is established, advance needle and peel-away sheath as a unit until sheath is adequately within vessel.
- Release tourniquet.
- Hold sheath steady and remove needle. **Warning: To minimize the risk of possible sheath embolism, do not reinsert needle into sheath.** Check for pulsatile flow as an indicator of inadvertent arterial puncture. **Precaution: The color of blood is not always a reliable indicator of venous access.¹³**

18. Grasp distal end of contamination guard, pull back to expose catheter tip, and advance catheter slowly through peel-away sheath. The contamination guard will peel off catheter as they are advanced simultaneously.
19. When catheter tip reaches level of axillary line, position patient to decrease possibility of catheter tip malposition into internal jugular vein.
Adult: Ask patient to turn their head toward catheterized arm and drop their chin to shoulder.²⁰
Pediatric: Instruct patient as appropriate. If resistance is met while advancing catheter, retract and/or gently flush while advancing.
20. Stop advancing catheter 2 inches (5 cm) before reaching pre-established insertion length.
21. Withdraw peel-away sheath until free from venipuncture site.
22. Grasp tabs of peel-away sheath and pull apart, away from catheter, until sheath splits down entire length.
23. Advance catheter to final indwelling position.
24. Remove Luer-Lock sidearm assembly and placement wire as a unit
25. Check catheter placement with syringe by aspirating through distal lumen until free flow of venous blood is observed. **Precaution: The color of blood is not always a reliable indicator of venous access.**¹³
26. Flush lumen with sufficient volume of solution to completely clear blood.
27. Connect pigtail to appropriate Luer-Lock line as required. Alternately, port may be “locked” through injection cap using standard hospital/agency protocol. **Warning: This product contains slide clamp which may be inadvertently removed and potentially aspirated, by children or confused adults. In such situations, practitioner should remove clamp when not in use.** Slide clamp is provided on pigtail to occlude flow through lumen during line and injection cap changes. **Precaution: To minimize the risk of damage to pigtail from excessive pressure, clamp must be opened prior to infusing through lumen.**

Arrow UserGard® Needle-Free Injection Hub (where provided)

Instructions for Use:

- Attach Luer end of UserGard® hub to syringe.
- Prepare injection cap with alcohol or povidone iodine per standard hospital/agency protocol.
- Remove red dust cap from hub.
- Press UserGard® hub onto injection cap and twist to lock on pin (refer to Fig. 3).

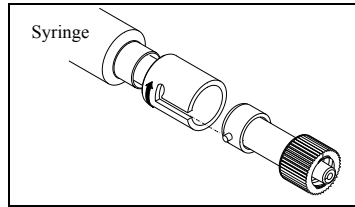


Fig. 3

- Inject or withdraw fluid as required.
 - Disengage UserGard® hub from injection cap and discard. **Warning: To minimize the risk of possible air embolism, do not leave UserGard® hub connected to injection cap.** Single use only.
28. Cleanse insertion site per hospital/agency protocol.
 29. Secure catheter. Where provided, a catheter clamp, fastener, StatLock® Anchoring Device or Steri-Strips®† may be used.

StatLock® Anchoring Device Instructions:

Initial Application:

- Cleanse and prep anticipated dressing site per hospital/agency protocol. Skin prep should be applied to coat skin and maximize StatLock® adherence. Allow to dry thoroughly. The anchor pad will be placed so center of pad is within 1 to 1-1/2 inches (2.5 to 3.8 cm) of catheter insertion site.
- The catheter can be secured to StatLock® by using the primary suture hub. **Precaution: Minimize catheter manipulation throughout this procedure to maintain proper catheter tip position. Provide strain relief placement of catheter under dressing.**

Primary Suture Hub Securement:

From earlier measurements, after catheter is properly positioned the primary suture hub is within 1 to 1-1/2 inches (2.5 to 3.8 cm) from insertion site. Place suture hub wings over StatLock® posts and press down (refer to Fig. 4). Snap StatLock® retainer wings to closed position to secure suture hub (refer to Fig. 5).

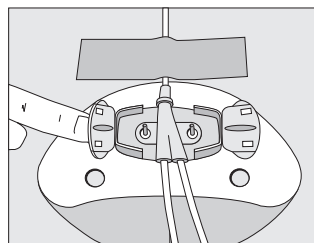


Fig. 4

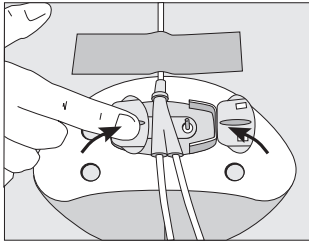


Fig. 5

- Remove paper backing from one half of StatLock® anchoring pad and press onto dry, prepared skin. Repeat process for other half of StatLock®.
- Complete sterile insertion site dressing according to established hospital/agency protocol.
- Document StatLock®/dressing application on patient's chart.
- Replace StatLock®/dressing per hospital/agency protocol. StatLock® anchoring device should be replaced at least every 7 days to ensure maximum adherence.

Alternate Technique:

Apply Steri-Strips®† and sterile dressing or apply suture and sterile dressing according to hospital/agency protocol. **Precaution: Do not suture directly to outside diameter of catheter to minimize the risk of cutting or damaging the catheter or impeding catheter flow.**

StatLock® Anchoring Device Removal:

- Remove dressing and sutures (if applicable).
- Open StatLock® retainer wings and remove catheter from StatLock® posts.
- Apply alcohol swab to StatLock® adhesive and gently lift pad off of skin.
- Document StatLock® removal procedure on patient's chart.

30. Apply PICC label to dressing.
31. Obtain chest x-ray immediately to verify tip placement. **Precaution: X-ray exam must show the catheter located in the right side of the mediastinum in the SVC above its junction with the right atrium and parallel to the vessel wall^{10,23} and its distal tip positioned at a level above either the azygos vein or the carina of the trachea, whichever is better visualized.** If catheter tip is malpositioned, reposition and re-verify. **Precaution: If difficulty is encountered in visualizing the catheter tip with x-ray, a small amount of radiopaque dye may be injected to assist in locating the tip.¹⁴**

32. Complete adhesive chart label and affix to patient's chart. Document assessments and insertion procedure.
33. Check catheter tip position routinely using centimeter marks on catheter.

Heparinization:

1. A variety of "locking" solution concentrations may be utilized to maintain patency of catheter. The amount of heparin used, if any, and frequency of flushing depends on physician preference, hospital/agency protocol, and patient condition.^{3,8}
2. The volume of heparin solution should be equal to, or slightly more than, the volume of the lumen that is being locked. Catheter priming volume is printed on product packaging.

Catheter Removal Procedure:

1. Remove dressing and sutures (if applicable). **Precaution: To minimize the risk of cutting catheter, do not use scissors to remove dressing.**
2. Open StatLock® retainer wings and remove catheter from StatLock® posts (if applicable).
3. Remove catheter by slowly pulling it parallel to skin. **Precaution: To minimize the risk of catheter breakage, do not exert excessive force if difficulty is encountered upon removal.** If resistance is met, apply heat for 20-30 minutes to area.^{16,25} Gently begin pulling catheter parallel to skin. If further difficulty is encountered, obtain an x-ray and consult physician.
4. Upon removal of catheter, measure and inspect to ensure that entire catheter length has been removed.
5. Apply alcohol swab to StatLock® adhesive and gently lift pad off of skin (if applicable).
6. Dress insertion site.
7. Document catheter removal and StatLock® removal (if applicable) removal procedures on patient's chart.

References:

1. Bar-Joseph G, Galvis AG. Perforation of the heart by central venous catheters in infants: guidelines to diagnosis and management. *J Pediatr Surg.* 1983;18:284-287.
2. Blitt CD, ed. *Monitoring in Anesthesia and Critical Care Medicine.* Central venous pressure monitoring. New York, NY: Churchill Livingstone; 1985:121-165.
3. Bonn J. Venous access: Peripherally inserted central catheters. 1994 Program, SCIVR '94, 19th Annual Scientific Meeting. San Diego, CA
4. Brandt RL, Foley WJ, Fink GH, Regan WJ. Mechanism of perforation of the heart with production of hydropericardium by a venous

- catheter and its prevention. *Am J Surg.* 1970;119:311-316.
5. Collier PE, Ryan JJ, Diamond DL. Cardiac tamponade from central venous catheters – report of a case and review of the English literature. *Angiology.* 1984;35:595-600.
 6. Conn C. The importance of syringe size when using implanted vascular access devices. *J Vasc Access Nurs.* 1993;3:11-18.
 7. Curelaru J, Linder LE, Gustavsson B. Displacement of catheters inserted through internal jugular veins with neck flexion and extension. *Intens Care Med.* 1980;6:179-183.
 8. Danek GD, Noris EM. Pediatric IV catheters: Efficacy of saline flush. *Pediatric Nursing.* 1992;18:111-113.
 9. Frey MA. Pediatric peripherally inserted central catheter program report – a summary of 4,536 catheter days. *JIN.* 1995;18:280-291.
 10. Iberti TJ, Katz LB, Reiner MA, Brownie T, Kwon KB. Hydrothorax as a late complication of central venous indwelling catheters. *Surgery.* 1983;842-846.
 11. Intravenous Nurses Society (INS). Midline and midclavicular catheters. *JIN.* July/August 1997;20:175-178.
 12. James L, Bledsoe L, Hadaway LC. A retrospective look at tip location and complications of peripherally inserted central catheter lines. *JIN.* 1993;16:104-109.
 13. Jobs DR, Schwartz AJ, Greenhow DE, Stephenson LW, Ellison N. Safer jugular vein cannulation: recognition of arterial punctures and preferential use of the external jugular route. *Anesthesiology.* 1983;59:353-355.
 14. LaFortune S. The use of confirming x-rays to verify tip position for peripherally inserted catheters. *JIN.* 1993;16:246-250.
 15. Loughran SC, Edwards S, McClure S. Peripherally inserted central catheters – guidewire versus non-guidewire use: A comparative study. *JIN.* 1992;15:152-159.
 16. Marx M. The management of the difficult peripherally inserted central venous catheter line removal. *JIN.* 1995;18:246-249.
 17. Maschke SP, Rogove HJ. Cardiac tamponade associated with a multilumen central venous catheter. *Crit Care Med.* 1984;12:611-612.
 18. Peters JL, ed. *A Manual of Central Venous Catheterization and Parenteral Nutrition.* Boston, Mass: John Wright PSG; 1983:140-146, 156.
 19. Ryder MA. Peripherally inserted central venous catheters. *Nursing Clinics of North America.* 1993;28:937-971.
 20. Ryder M. Total parenteral nutrition. In: Boggs RL, Woodridge-Kin M, eds. *AACN Procedural Manual for Critical Care Nursing.* 3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders Co: 1993:771-812.
 21. Sheep RE, Guiney WB Jr. Fatal cardiac tamponade. *JAMA.* 1982;248:1632-1635.
 22. Sigurdsson J, Riba P, Sigurdsson S. The wandering central venous catheter. *Intensive Care Med.* 1985;11:263-264.
 23. Tocino IM, Watanabe A. Impending catheter perforation of superior vena cava: radiographic recognition. *Am J Roentgenology.* 1986;146:487-490.
 24. Todres ID, Cote CJ. Procedures. In: Cote CJ, Ryan JF, Todres ID, Goudsouzian NG, eds. *A Practice of Anesthesia for Infants and Children.* 2nd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders Co; 1993:505-523.
 25. Wall JL, Kierstead VL. Peripherally inserted central catheters resistance to removal: A rare complication. *JIN.* 1995;18:251-254.
- Arrow International, Inc., recommends that the user be acquainted with the reference literature.
- *If you have any questions or would like additional reference information, please contact Arrow International, Inc.
- †Steri-Strip® is a registered trademark of 3M Health Care.

Cathéter central veineux à insertion périphérique pouvant être coupé et fil de placement

Efficacité et sécurité :

N'utilisez pas si l'emballage a été endommagé ou est déjà ouvert. **Avertissement : Avant l'utilisation, lisez tous les avertissements ainsi que toutes les mises en garde et les instructions de la notice accompagnant le produit. Le non-respect du mode d'emploi risquerait de causer des blessures graves ou d'entraîner le décès du malade.**

N'altérez pas le cathéter ou tout autre composant de ce kit/jeu durant l'insertion, l'utilisation ou le retrait du matériel, sauf en cas d'instructions précises à cet effet.

La procédure doit être effectuée par un personnel qualifié appliquant une technique sans danger, et faisant preuve d'une excellente connaissance des points de repères anatomiques et des complications potentielles.

Avertissement : Il ne faut ni placer, ni laisser le cathéter dans l'oreillette ou le ventricule droits (cf. Fig. 1).

Tamponnade cardiaque : De nombreux auteurs ont décrit le danger^{1,2,4,5,7,17,18} de perforation cardiaque avec tamponnade^{1,2,4,5,17,18} lors de la mise à demeure d'un cathéter dans l'oreillette droite. Bien qu'une tamponnade secondaire à un épanchement dans le péricarde soit chose rare, elle est accompagnée d'un taux de mortalité élevé.²¹ Lors du placement de cathéters dans le système veineux central, tout praticien doit se méfier de cette complication potentiellement fatale et juger de l'avancement du cathéter en fonction de la taille du patient.

Une telle complication potentiellement fatale peut survenir avec n'importe quel cathéter et suivant n'importe quelle voie d'accès.¹⁸ Après l'insertion du cathéter à demeure, il faut confirmer la position de son extrémité par radiographie.^{1,2,5,17,18,22} Les cathéters pour le système veineux central doivent être placés dans la veine cave supérieure^{1,2,4,5,7,17,23} au-dessus de sa jonction avec l'oreillette droite et parallèlement à la paroi vasculaire^{10,23} et leur extrémité distale doit être placée juste au-dessus de la veine azygos ou la carène de la trachée. Choisissez la référence la plus visible.

Ces cathéters pour le système veineux central ne doivent pas être placés dans l'oreillette droite à moins que cette position ne soit requise pour une procédure relativement brève, telle que l'aspiration d'embolie gazeuse lors d'interventions neurochirurgicales. Mais de telles techniques sont néanmoins très risquées et elles doivent être étroitement surveillées et contrôlées.

Indications d'emploi :

Un cathéter central veineux à insertion périphérique permet un accès veineux à la circulation centrale par l'intermédiaire d'une veine périphérique. Il offre une méthode différente de traitement intraveineux pour des adultes et des enfants répondant à des critères déterminés.

Contre-indications :

Aucune connue.

Avertissements et précautions : *

- 1. Avertissement : Stérile, à usage unique : Ne pas réutiliser, retraiter ou restériliser. La réutilisation du produit crée un risque potentiel de blessure et/ou d'infection grave pouvant causer le décès.**
- 2. Avertissement : Il ne faut ni placer, ni laisser le cathéter dans l'oreillette ou le ventricule droits. Tout cathéter veineux central doit être mis en place de telle manière que son extrémité distale soit dans la veine cave supérieure (VCS) au-dessus de sa jonction avec l'oreillette droite, et qu'il soit parallèle à la paroi vasculaire.**
- 3. Avertissement : Les praticiens doivent être conscients des complications associées aux cathéters veineux centraux, y compris la tamponnade cardiaque résultant d'une perforation auriculaire, ventriculaire ou de la paroi vasculaire, les lésions pleurales et médiastinales, l'embolie gazeuse, l'embolie due au cathéter, la lacération du canal thoracique, la bactériémie, la septicémie, les thromboses, la ponction artérielle accidentelle, les lésions nerveuses, la formation d'hématomes, l'hémorragie et les dysrythmies.**
- 4. Avertissement : N'appliquez pas une force excessive en plaçant le cathéter ou en le retirant. Si le placement ou le retrait ne sont pas aisés, il faut effectuer une radiographie du thorax et demander des consultations supplémentaires.**
- 5. Avertissement : Le praticien doit être conscient des risques d'embolie gazeuse associés au fait de laisser des aiguilles ou des cathéters ouverts sur des sites de ponction veineuse centrale ou à la suite d'une disjonction accidentelle. Pour diminuer le risque d'embolie gazeuse, il ne faut utiliser avec ce dispositif que des raccords de type "Luer-Lock" très bien ajustés. Il faut suivre le protocole hospitalier de protection contre les embolies gazeuses lors de l'entretien du cathéter.**
- 6. Avertissement : Le praticien doit être conscient des conditions cliniques qui peuvent limiter l'utilisation de cathéters CIP, comme : la dermatite, la cellulite et les brûlures sur le site d'insertion ou à proximité de celui-ci, une**

thrombose veineuse ipsilatérale antérieure, un traitement par irradiation, des contractures, une mastectomie et une utilisation possible d'une fistule artério-veineuse.

7. **Avertissement :** En cas de retrait du fil de placement avant l'insertion du cathéter, ne tentez pas de réinsérer le fil de placement ; vous réduirez ainsi le plus possible le risque d'endommager le cathéter.
8. **Avertissement :** En raison du risque d'exposition au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou à d'autres agents pathogènes à diffusion hémotogène, le personnel médical doit prendre toutes les mesures de protection indispensables lors de la manipulation de sang ou d'autres fluides corporels, et ceci avec tous les patients.
9. **Précaution :** En présence de cathéters à demeure, il faut contrôler régulièrement le débit désiré, la sûreté du pansement, la bonne position du cathéter et les raccords Luer-Lock. Utilisez les repères en centimètres pour vérifier la position du cathéter.
10. **Précaution :** Seule la radiographie peut assurer que l'extrémité du cathéter n'est pas entrée dans le cœur ou qu'elle n'est plus parallèle à la paroi vasculaire. Si le cathéter a changé de position, il faut immédiatement faire une radiographie du thorax pour confirmer la position de son extrémité.
11. **Précaution :** L'alcool et l'acétone peuvent affaiblir la structure des matériaux en polyuréthane. Vérifiez que les pulvérisateurs et les tampons d'ouate utilisés pour la préparation préopératoire ne contiennent pas d'acétone ou d'alcool.
Acétone : N'utilisez pas d'acétone sur la surface du cathéter. Il est possible d'appliquer de l'acétone sur la peau, mais il faut la laisser sécher complètement avant d'appliquer un pansement.
Alcool : Ne faites pas tremper le cathéter dans de l'alcool et n'utilisez pas d'alcool pour dégager tout blocage du cathéter. Il faut faire très attention lors de l'administration de médicaments contenant une forte concentration d'alcool. Laissez toujours l'alcool sécher complètement avant d'appliquer un pansement. Ces agents risquent également d'affaiblir l'adhésion entre le dispositif d'ancrage StatLock et la peau.
12. **Précaution :** Certains désinfectants utilisés sur le site d'insertion du cathéter contiennent des solvants qui peuvent attaquer le matériau du cathéter. Assurez-vous que le site d'insertion soit sec avant d'appliquer le pansement.
13. **Précaution :** Les indications d'emploi pour les enfants sont les mêmes que pour les adultes ; cependant, les techniques d'insertion sont souvent modifiées en fonction de l'âge et de la taille de l'enfant ; si le praticien n'a pas

d'expérience de l'utilisation de ce produit pour un enfant, il doit demander une consultation appropriée.

14. **Précaution :** Lorsque le cathéter est placé de telle sorte que l'embout distal est situé dans un vaisseau à proximité de la VCS (médioclaviculaire ou médiane), les praticiens doivent être conscients du risque de thrombophlébite induite chimiquement.¹¹ Lors de l'administration d'une solution contenant > 10 % de glucose/nutrition parentérale totale, d'un médicament quelconque dont l'osmolarité dépasse 600 mOsm/litre, de médicaments dont l'osmolarité est comprise entre 400 et 600 mOsm/litre pendant plus de 4 semaines ou de médicaments dont on sait qu'ils irritent les vaisseaux à proximité de la veine cave, l'extrémité du cathéter doit être située dans la circulation centrale.¹⁹
15. **Précaution :** Pour réduire au minimum le risque de dommage au cathéter induit par la pression, n'exposez pas le cathéter à des pressions dépassant 50 psi. Voici quelques sources courantes de pression potentiellement élevée : des seringues de moins de 10 cm³ utilisées pour irriguer ou décoaguler un cathéter obstrué (une seringue d'un centimètre cube remplie de liquide peut avoir une pression de plus de 300 psi⁶), certaines procédures radiographiques et des pompes de perfusion dont les limites de pression d'obstruction dépassent 50 psi.
16. **Précaution :** Le dispositif d'ancrage StatLock doit être inspecté périodiquement pour vérifier qu'il adhère correctement à la peau et qu'il est bien connecté au cathéter. Il faut vérifier en même temps la position du cathéter au moyen des repères en centimètres sur le corps du cathéter.

Procédure suggérée : Utilisez la technique stérile.

1. Vérifiez les consignes du médecin. Celles-ci doivent comprendre une radiographie des poumons après le placement.
2. Expliquez les procédures au patient. Faites signer le formulaire de consentement éclairé si nécessaire.
3. Mesurez et inscrivez la circonférence de la partie supérieure du bras.
4. En utilisant le tourniquet suivant les besoins, identifiez la veine appropriée pour l'insertion.
Adultes : Les cathéters CIP sont généralement insérés dans les veines basilique, cubitale médiane ou céphalique (cf. Fig. 2).
Enfants : Les cathéters CIP sont généralement insérés dans les veines basilique, céphalique, saphène ou du cuir chevelu.⁹ Le choix de la veine la plus appropriée dépend de la taille et de la maturité de l'enfant.

5. Relâchez le tourniquet en le laissant en place au-dessous du bras.

6. Mesurez le patient pour déterminer la longueur du cathéter qui est requise pour placer l'extrémité distale dans la VCS.

Adultes : Étendez le bras d'environ 45 à 90 degrés par rapport au corps. Mesurez la distance depuis le site d'insertion le long du chemin anatomique présumé du vaisseau devant faire l'objet du cathétérisme. L'extrémité du cathéter doit être placée dans le tiers le plus proche de l'extrémité distale le long de la VCS, au-dessus de l'oreillette droite et parallèlement à la paroi de la VCS. Si un dispositif d'ancrage StatLock doit être utilisé, ajoutez de 2,5 à 3,8 cm à la mesure du cathéter.

Enfants : Mesurez la distance depuis le site d'insertion le long du chemin anatomique présumé du vaisseau devant faire l'objet du cathétérisme. L'extrémité du cathéter doit être placée dans le tiers le plus proche de l'extrémité distale le long de la VCS, au-dessus de l'oreillette droite et parallèlement à la paroi de la VCS. Lorsque le site d'insertion est la veine saphène, l'extrémité du cathéter doit être placée dans le tiers le plus proche de l'extrémité distale le long de la veine cave inférieure (VCI), au-dessous de l'oreillette droite et parallèlement à la paroi de la VCI. Si un dispositif d'ancrage StatLock doit être utilisé, ajoutez de 2,5 à 3,8 cm à la mesure du cathéter.

7. Positionnez le patient en vue de l'insertion.

Adultes : Positionnez le patient comme cela est approprié en fonction du site d'insertion. Étendez le bras latéralement de 45 à 90 degrés du corps.

Enfants : Positionnez le patient comme cela est approprié en fonction du site d'insertion.

8. Effectuez un lavage chirurgical. Portez les vêtements appropriés (masque, lunettes de protection, blouse stérile, gants stériles, bonnet pour les cheveux).

9. Préparez le site de la ponction veineuse en utilisant les antiseptiques appropriés.

10. Effectuez une saillie cutanée avec un anesthésique local suivant les besoins. Dans certains kits, une pelote SharpsAway est fournie pour la mise au rebut des aiguilles. Enfoncez les aiguilles dans la mousse après utilisation. Jetez toute la pelote après l'achèvement de la procédure. **Précaution : Ne réutilisez pas les aiguilles après qu'elles ont été placées dans la pelote. Des matières particulaires risquent d'adhérer à l'extrémité de l'aiguille.**

11. Préparez tous les équipements. Retirez le dispositif de protection de l'extrémité du cathéter. Rétractez le fil de placement d'environ 2,5 à 3,8 cm depuis l'emplacement où le cathéter doit être coupé. **Avertissement : Ne coupez pas le fil de placement. Coudez l'extrémité proximale du fil**

de placement au niveau du connecteur avec port latéral. Ceci réduit le risque que le fil de placement ne s'étende au-delà de l'extrémité distale du cathéter au cours de l'insertion.^{14,15} Détachez le bouclier anti-contamination pour exposer la portion du cathéter à couper. À l'aide de l'instrument tranchant, coupez au travers du cathéter (90° de la section transversale du cathéter) afin de maintenir une extrémité émoussée.

12. Attachez la seringue au bras latéral et purgez la lumière distale avec une solution de sérum physiologique. Laissez la seringue en place. Placez le cathéter sur un champ stérile.

13. Appliquez de nouveau le tourniquet et remplacez les gants stériles.

14. Couvrez le site pour assurer une protection maximale.

15. En utilisant une gaine à dossier décollable au-dessus de l'aiguille, effectuez une ponction veineuse. Lorsque le retour du liquide aura commencé, faites avancer ensemble l'aiguille et la gaine à dossier décollable jusqu'à ce que la gaine soit adéquatement à l'intérieur du vaisseau.

16. Relâchez le tourniquet.

17. Retirez l'aiguille tout en maintenant fermement la gaine. **Avertissement : Pour réduire au minimum le risque d'embolie avec la gaine, ne réinsérez pas l'aiguille dans la gaine.** Vérifiez le flux pulsatile comme indicateur de ponction artérielle inadvertante. **Précaution : La couleur du sang aspiré n'est pas toujours un indicateur fiable de l'accès veineux.**¹³

18. Saisissez l'extrémité distale du bouclier anti-contamination, tirez vers l'arrière pour exposer l'extrémité du cathéter et faites avancer lentement le cathéter à travers la gaine à dossier décollable. Le bouclier anti-contamination se décolle du cathéter au fur et à mesure qu'ils avancent simultanément.

19. Lorsque l'extrémité du cathéter atteint le niveau de la ligne axillaire, positionnez le patient pour réduire la possibilité de positionnement incorrect de l'extrémité du cathéter dans la veine jugulaire interne.

Adultes : Demandez au patient de tourner la tête vers le bras faisant l'objet du cathétérisme et de baisser le menton vers l'épaule.²⁰

Enfants : Donnez les instructions appropriées au patient.

En cas de résistance lors de l'avancement du cathéter, rétractez et/ou lavez doucement pendant l'avancement.

20. Arrêtez l'avance du cathéter 5 cm avant l'atteinte de la longueur d'insertion décidée à l'avance.

21. Retirez la gaine à dossier décollable jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en contact avec le site de la ponction veineuse.

22. Saisissez les pattes de la gaine à dossier décollable et écartez-les pour les éloigner du cathéter jusqu'à ce que la gaine se fende sur toute sa longueur.
23. Faites avancer le cathéter jusqu'à sa position finale à demeure.
24. Retirez d'un bloc l'ensemble de bras latéral de raccord Luer-Lock et le fil de placement
25. Vérifiez le placement du cathéter avec la seringue en aspirant à travers la lumière distale jusqu'à ce que vous observiez un passage libre de sang veineux. **Précaution : La couleur du sang aspiré n'est pas toujours un indicateur fiable de l'accès veineux.**¹³
26. Lavez la lumière avec un volume suffisant de solution de lavage pour faire sortir tout le sang aspiré de la lumière.

27. Connectez la queue de cochon à la ligne Luer-Lock appropriée suivant les besoins. Il est également possible de boucher le port avec une solution de remplissage introduite par le bouchon d'injection en appliquant le protocole standard de l'hôpital ou du centre médical. **Avertissement : Ce produit contient un clamp latéral qui peut être retiré par inadvertance et risque ainsi d'être aspiré par des enfants ou par des adultes troublés.** Dans de telles situations, le praticien doit retirer le clamp qui n'est pas utilisé. Le clamp latéral est fourni sur la queue de cochon pour obstruer la lumière pendant les changements de lignes et de capuchons d'injection. **Précaution : Pour réduire au minimum le risque d'endommager la queue de cochon en raison d'une pression excessive, ouvrez le clamp avant la perfusion à travers la lumière.**

**Garde d'injection sans aiguille
Arrow UserGard
(dans les kits où elle est fournie)
Mode d'emploi :**

- Attachez le bout Luer de la garde UserGard à la seringue.
- Préparez le bouchon d'injection avec de l'alcool ou de l'iode de povidone conformément au protocole standard de l'hôpital ou du centre médical.
- Retirez le bouchon rouge de protection contre la poussière de la garde.
- Poussez la garde UserGard contre le bouchon d'injection et faites tourner pour la verrouiller sur la broche (cf. Fig. 3).
- Injectez ou aspirez le fluide suivant le cas.
- Désengagez la garde UserGard du bouchon d'injection et jetez-la. **Avertissement : Pour réduire au minimum le risque d'embolie gazeuse possible, ne laissez pas la garde UserGard connectée au bouchon d'injection.** Ne la réutilisez pas.

28. Nettoyez le site d'insertion conformément au protocole de l'hôpital ou du centre médical.
29. Fixez le cathéter. Lorsqu'il sont fournis, un clamp de cathéter, une attache, un dispositif d'ancrage StatLock ou des bandes Steri-Strips peuvent être utilisés.

Instructions pour le dispositif d'ancrage StatLock :

Application initiale :

- Nettoyez et préparez le site prévu pour le pansement conformément au protocole de l'hôpital ou du centre médical. Une préparation cutanée doit être appliquée pour recouvrir la peau et optimiser l'adhérence du dispositif StatLock. Laissez sécher complètement. Le tampon d'ancrage doit être positionné de telle sorte que son centre soit situé entre 2,5 et 3,8 cm du site d'insertion du cathéter.
- Le cathéter peut être assujéti au dispositif StatLock à l'aide de la garde de la suture primaire. **Précaution : Réduisez au minimum la manipulation du cathéter tout au long de cette procédure afin de conserver la position correcte de l'extrémité du cathéter. Placez le cathéter sous le pansement de façon à ce qu'il ne soit pas trop tendu.**

Assujettissement de la garde de suture primaire :

Sur la base des mesures effectuées antérieurement, après le positionnement correct du cathéter, la garde de la suture primaire est entre 2,5 et 3,8 cm du site d'insertion. Placez les ailes de la garde de la suture au-dessus des montants du dispositif StatLock et appuyez (cf. Fig. 4). Placez les ailes de retenue du StatLock dans la position fermée (vous entendrez un bruit sec) de manière à assujettir fermement la garde de la suture (cf. Fig. 5).

- Retirez la pellicule de papier d'une moitié du tampon d'ancrage StatLock et appliquez le tampon sur la peau sèche préparée. Répétez le processus pour l'autre moitié du tampon StatLock.
- Terminez le pansement du site d'insertion stérile conformément au protocole établi par l'hôpital ou le centre médical.
- Documentez l'application du StatLock et du pansement sur la pancarte du patient.
- Remplacez le StatLock et le pansement conformément au protocole établi par l'hôpital ou le centre médical. Il faut remplacer le dispositif d'ancrage StatLock au moins une fois par semaine pour assurer le maximum d'adhérence.

Autre technique :

Appliquez des bandes Steri-Strips et un pansement stérile ou une suture et un pansement stérile conformément au protocole établi par l'hôpital ou le centre médical. **Précaution : Ne pas faire de**

suture directement sur le diamètre extérieur du cathéter pour réduire au minimum le risque de le couper ou de l'endommager, ou de bloquer l'écoulement dans le cathéter.

Retrait du dispositif d'ancrage StatLock :

- Retirez le pansement et les sutures, le cas échéant.
 - Ouvrez les ailes de retenue du StatLock et retirez le cathéter des montants du dispositif StatLock (s'il y a lieu).
 - Appliquez un coton imbibé d'alcool sur le ruban adhésif du StatLock et séparez doucement le tampon de la peau.
 - Documentez la procédure de retrait du cathéter sur la pancarte du patient.
30. Appliquez l'étiquette du CCIP sur le pansement.
 31. Effectuez immédiatement une radio du thorax pour vérifier l'emplacement de l'extrémité.
Précaution : La radio doit montrer le cathéter situé du côté droit du médiastin dans la VCS au-dessus de sa jonction avec l'oreillette droite et parallèlement à la paroi du vaisseau^{10,23} et son extrémité distale positionnée à un niveau au-dessus de la veine azygos ou de l'éperon trachéal, suivant le point le plus visible. Si l'extrémité du cathéter n'est pas à l'endroit correct, repositionnez-la et vérifiez à nouveau.
Précaution : En cas de difficulté pour visualiser l'extrémité du cathéter sur la radio, un faible montant de colorant radio-opaque peut être injecté pour aider à localiser l'extrémité.¹⁴
 32. Remplissez l'étiquette adhésive de son dossier et collez-la sur la pancarte du patient. Documentez les évaluations et la procédure d'insertion.
 33. Vérifiez périodiquement la position de l'extrémité du cathéter en vous aidant des repères en centimètres sur le cathéter.

Héparination :

1. Plusieurs concentrations différentes de solution de "verrouillage" peuvent être utilisées pour garder le cathéter ouvert. Le montant d'héparine utilisé, le cas échéant, et la fréquence de lavage, dépendent

de la préférence du médecin, du protocole de l'hôpital ou du centre médical et de l'état du patient.^{3,8}

2. Le volume de la solution d'héparine doit être égal ou légèrement supérieur à celui de la lumière qui est en train d'être verrouillée. Le volume d'amorçage du cathéter est imprimé sur l'emballage du produit.

Procédure pour le retrait du cathéter :

1. Retirez le pansement et les sutures, le cas échéant.
Précaution : Pour réduire au minimum le risque de couper le cathéter, n'utilisez pas de ciseaux pour retirer les pansements.
2. Ouvrez les ailes de retenue du StatLock et retirez le cathéter des montants du dispositif StatLock (s'il y a lieu).
3. Retirez le cathéter en tirant lentement dessus et parallèlement à la peau. **Précaution : Pour réduire au minimum le risque de cassure du cathéter, n'exercez pas une force excessive en cas de difficulté lors du retrait.** En cas de résistance, appliquez de la chaleur pendant 20 à 30 minutes sur la zone en question.^{16,25} Tirez le cathéter avec douceur, parallèlement à la peau. Si vous avez toujours des difficultés, faites une radio et consultez un médecin.
4. Après avoir retiré le cathéter, mesurez-le et inspectez-le pour vous assurer que toute la longueur du cathéter a été retirée.
5. Appliquez un coton imbibé d'alcool sur le ruban adhésif du StatLock et séparez doucement le tampon de la peau (s'il y a lieu).
6. Pansez le site d'insertion.
7. Documentez la procédure de retrait du cathéter ainsi que celle du dispositif StatLock (s'il y a lieu) sur la pancarte du patient.

Arrow International, Inc. recommande que l'utilisateur se familiarise avec la documentation de référence.

* Si vous avez des questions ou si vous désirez des ouvrages de référence supplémentaires, veuillez entrer en contact avec Arrow International, Inc.

Peripher eingeführter, kürzbarer zentraler Venenkatheter mit Platzierungsdraht

Hinweise zur Sicherheit und Leistungsfähigkeit:

Nicht verwenden, wenn die Packung offen oder beschädigt ist. **Warnung: Vor Gebrauch alle Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen in der Packungsbeilage lesen. Wenn dies nicht getan wird, kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Patienten kommen.**

Falls nicht anders angegeben, dürfen am Katheter oder anderen Komponenten der Ausstattung/Garnitur während der Einführung, Verwendung oder Entfernung keinerlei Änderungen vorgenommen werden.

Der Eingriff muß von geschultem Personal, das über die anatomischen Verhältnisse, eine sichere Technik und potentielle Komplikationen informiert ist, durchgeführt werden.

Warnung: Katheter nicht im rechten Atrium oder im rechten Ventrikel plazieren oder dort liegen lassen (siehe Abb. 1).

Herztaмпonade: Es wurde von mehreren Autoren dokumentiert, daß die Platzierung eines Verweilkatheters im rechten Atrium gefährlich ist^{1,2,4,5,7,17,18} und zu einer kardialen Perforation und Tamponade führen kann.^{1,2,4,5,17,18} Eine Herztaмпonade als Folge eines Perikard-Ergusses ist ungewöhnlich, bringt aber eine hohe Mortalitätsrate mit sich.²¹ Ärzte müssen sich beim Legen eines zentralen Venenkatheters dieser potentiell lethalen Komplikation bewußt sein, um den Katheter im Verhältnis zur Größe des Patienten nicht zu weit vorzuschieben.

Diese potentiell tödliche Komplikation kann unabhängig vom Zugang und der Art des Katheters auftreten.¹⁷ Die endgültige Position der Spitze des Verweilkatheters sollte nach der Einführung mittels Röntgen kontrolliert werden.^{1,2,5,16,18,22} Zentrale Venenkatheter sollten in der Vena cava superior^{1,2,4,5,7,17,23} über der Einmündung in das rechte Atrium und parallel zur Gefäßwand^{10,23} plaziert werden, wobei sich die distale Spitze über der Vena azygos oder der Carina der Trachea, je nachdem was besser sichtbar ist, befinden sollte.

Zentrale Venenkatheter sollten nicht im rechten Atrium plaziert werden, es sei denn, dies wird für bestimmte kurzdauernde Verfahren gewünscht, wie etwa zur Aspiration von Luftemboli bei neurochirurgischen Eingriffen. Diese Anwendungen bergen jedoch ein Risiko in sich und sollten deshalb genau überwacht und kontrolliert werden.

Indikationen:

Ein peripher eingeführter zentraler Venenkatheter ermöglicht einen venösen Zugang zur zentralen Zirkulation über eine periphere Vene. Er bietet eine Alternative für intravenöse Behandlungen bei ausgewählten Erwachsenen und Kindern.

Kontraindikationen:

Nicht bekannt.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen:*

- 1. Warnung: Steril, für den Einmalgebrauch: Nicht wiederverwenden, wiederaufbereiten oder erneut sterilisieren. Eine Wiederverwendung der Vorrichtung birgt das potenzielle Risiko einer schweren Verletzung und/oder Infektion, die zum Tod führen kann.**
- 2. Warnung: Katheter nicht im rechten Atrium oder rechten Ventrikel plazieren oder dort liegen lassen. Zentrale Venenkatheter sollten so in der Vena cava superior plaziert werden, daß die distale Spitze des Katheters in der V. cava superior über der Einmündung in das rechte Atrium und parallel zur Gefäßwand liegt.**
- 3. Warnung: Ärzte müssen über folgende Komplikationen, die bei zentralen Venenkathetern auftreten können, informiert sein: Herztaмпonade als Folge einer Gefäßwand-, Vorhof- oder Kammerperforation, Pleura- oder Mediastinumverletzungen, Luftembolie, embolische Verschleppung des Katheters, Verletzung des Ductus thoracicus, Bakteriämie, Septikämie, Thrombose, unbeabsichtigte Punktion einer Arterie, Nervenschädigung, Hämatombildung, Blutung und Dysrhythmien.**
- 4. Warnung: Keine übermäßige Kraft bei der Platzierung oder Entfernung des Katheters anwenden. Falls die Platzierung oder Entfernung nicht ohne Schwierigkeiten möglich ist, sollte ein Thoraxröntgen gemacht und das weitere Vorgehen besprochen werden.**
- 5. Warnung: Ärzte müssen über die potentielle Gefahr einer Luftembolie informiert sein, die auftreten kann, wenn Kanülen oder Katheter in zentralvenösen Punktionsstellen offen liegen gelassen werden oder wenn es zu unbeabsichtigten Diskonnektionen kommt. Um das Risiko einer Luftembolie zu verringern, sollten nur feste Luer-Lock-Verbindungen mit dieser Vorrichtung verwendet werden. Die Krankenhaus-/Praxisbestimmungen zur Vorbeugung gegen Luftembolie sind bei allen Katheterpflageschritten zu befolgen.**

6. **Warnung:** Ärzte müssen darüber informiert sein, daß klinische Zustände die Verwendung von PEZ-Kathetern einschränken können; dazu gehören: Dermatitis, Zellulitis und Verbrennungen an oder in der Umgebung der Einführungsstelle, Zustand nach ipsilateraler Venenthrombose, Bestrahlungstherapie, Kontrakturen, Mastektomie, und mögliche Verwendung bei AV-Fisteln.
 7. **Warnung:** Um das Risiko einer Katheterschädigung auf ein Minimum herabzusetzen, den Platzierungsdraht keinesfalls erneut einführen, wenn er vor der Kathedereinführung entfernt wurde.
 8. **Warnung:** Da das Risiko einer Infektion mit dem humanen Immundefizienzvirus (HIV) und anderen durch Blut übertragbaren Keimen besteht, sollte das Personal bei der Pflege aller Patienten immer allgemeine Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Blut und Körperflüssigkeiten treffen.
 9. **Vorsichtsmaßnahme:** Verweilkatheter sollten routinemäßig auf die gewünschte Flußrate, sicheren Verband, korrekte Katheterlage und sichere Luer-Lock-Verbindung untersucht werden. Zentimeter-Markierungen zur Überprüfung der Katheterlage verwenden.
 10. **Vorsichtsmaßnahme:** Nur eine Röntgenaufnahme kann mit Sicherheit bestätigen, daß die Katheterspitze nicht im Herzen und parallel zur Gefäßwand liegt. Falls sich die Lage des Katheters verändert, muß die Lage der Katheterspitze sofort mittels Röntgen überprüft werden.
 11. **Vorsichtsmaßnahme:** Alkohol und Azeton können die Struktur von Polyurethan schwächen. Bestandteile von Sprays zur Vorbereitung der Haut für chirurgische Eingriffe und Tupfern auf Azeton und Alkohol überprüfen.
Azeton: Azeton nicht auf eine Katheteroberfläche aufbringen. Azeton kann auf der Haut verwendet werden, muß aber vollständig getrocknet sein, bevor ein Verband angelegt wird.
Alkohol: Katheter dürfen nicht in Alkohol eingeweicht werden. Alkohol darf nicht zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit eines Katheters verwendet werden. Bei der Verabreichung von Medikamenten, die hochkonzentrierten Alkohol enthalten, sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden. Alkohol auf der Haut muß immer vollständig getrocknet sein, bevor ein Verband angelegt wird.
Diese Substanzen können auch die Klebeverbindung zwischen der StatLock-Befestigungsvorrichtung und der Haut schwächen.
 12. **Vorsichtsmaßnahme:** Manche an der Katheter-Einführungsstelle verwendete Desinfektionsmittel enthalten Lösemittel, die das Material des Katheters angreifen können. Vergewissern Sie sich, daß die Einführungsstelle trocken ist, bevor der Verband angelegt wird.
 13. **Vorsichtsmaßnahme:** Die Indikationen für Kinder sind dieselben wie für Erwachsene. Die Einführtechnik muß allerdings des öfteren je nach Alter und Größe des Kindes modifiziert werden. Wenn der Arzt keine Erfahrung im Gebrauch dieses Produkts bei Kindern hat, sollte er sich entsprechend beraten lassen.
 14. **Vorsichtsmaßnahme:** Wenn der Katheter so platziert wird, daß sich das distale Ende in einem Gefäß proximal von der V. cava superior (in der Medioklavikular- oder Mittellinie) befindet, muß sich der Arzt darüber im klaren sein, daß das Risiko einer chemisch induzierten Thrombophlebitis besteht.¹¹ Bei Verabreichung von > 10%iger Glukose bzw. bei vollständiger künstlicher Ernährung, bei Verabreichung von Medikamenten mit einer Osmolarität von mehr als 600 mOsm/Liter bzw. von Medikamenten mit einer Osmolarität zwischen 400 und 600 mOsm/Liter über mehr als 4 Wochen, oder von Medikamenten, die bekanntermaßen eine Irritation von Gefäßen proximal von der Vena cava hervorrufen, muß sich die Katheterspitze im zentralen Kreislauf befinden.¹⁹
 15. **Vorsichtsmaßnahme:** Um das Risiko einer Schädigung des Katheters durch Druck auf ein Minimum herabzusetzen, sollte ein Druck über 50 psi nicht angewendet werden. Ein hoher Druck kann zustande kommen, wenn Spritzen, die kleiner als 10 cc sind, zur Spülung oder Entfernung eines Blutgerinnsels aus einem verschlossenen Katheter verwendet werden (eine mit Flüssigkeit gefüllte 1 cc-Spritze kann unter einem Druck von mehr als 300 psi stehen⁶), sowie bei bestimmten Röntgenuntersuchungen und bei Verwendung von Infusionspumpen mit einer Verschlusdruckgrenze von mehr als 50 psi.
 16. **Vorsichtsmaßnahme:** Die Klebeverbindung zwischen der StatLock-Befestigungsvorrichtung und der Haut und die Verbindung derselben mit dem Katheter sollten routinemäßig überprüft werden. Gleichzeitig sollte die Katheterstellung mittels der Zentimetermarkierung am Katheterkörper überprüft werden.
- Vorgeschlagenes Vorgehen:
Eine sterile Technik verwenden.**
1. Anordnung des Arztes verifizieren. Die Anordnung des Arztes muß ein Thoraxröntgen im Anschluß an die Platzierung enthalten.
 2. Das Verfahren sollte dem Patienten erklärt werden. Wie erforderlich, Einverständniserklärung vom Patienten unterschreiben lassen.

3. Umfang des Oberarms messen und notieren.
4. Eine geeignete Vene zur Einführung identifizieren, wenn nötig unter Verwendung eines Tourniquets.
Bei Erwachsenen: Wird der PEZ-Katheter normalerweise in die V. basilica, V. mediana cubiti oder V. cephalica eingeführt (siehe Abb. 2).
Bei Kindern: Wird der PEZ-Katheter normalerweise in die V. basilica, V. cephalica, Kopfhaarvenen oder die V. saphena eingeführt.⁹ Welche Vene am besten geeignet ist, hängt von der Größe und Reife des Kindes ab.
5. Tourniquet öffnen und unter dem Arm liegen lassen.
6. Größe des Patienten bestimmen, um die Länge des Katheters, die erforderlich ist, um die distale Spitze in der V. cava superior zu platzieren, zu ermitteln.
Bei Erwachsenen: Arm ca. 45-90° vom Rumpf abduzieren. Entfernung von der Einführungsstelle aus entlang des angenehmen anatomischen Verlaufs des zu katheterisierenden Gefäßes messen. Die Katheterspitze sollte im distalen Drittel der V. cava superior über dem rechten Atrium und parallel zur Wand der V. cava superior liegen. Wenn eine StatLock-Befestigungsvorrichtung verwendet wird, 2,5 - 3,8 cm dazurechnen.
Bei Kindern: Entfernung von der Einführungsstelle aus entlang des angenehmen anatomischen Verlaufs des zu katheterisierenden Gefäßes messen. Die Katheterspitze sollte im distalen Drittel der V. cava superior über dem rechten Atrium und parallel zur Wand der V. cava superior liegen. Wenn der Katheter in die V. saphena eingeführt wird, sollte die Katheterspitze im distalen Drittel der V. cava inferior, unter dem rechten Atrium und parallel zur Wand der V. cava inferior liegen. Wenn eine StatLock-Befestigungsvorrichtung verwendet wird, 2,5 - 3,8 cm dazurechnen.
7. Patienten in die richtige Stellung zur Kathetereinführung bringen.
Bei Erwachsenen: Patienten in eine für die Einführungsstelle angemessene Stellung bringen. Arm ca. 45-90° vom Rumpf abduzieren.
Bei Kindern: Patienten in eine für die Einführungsstelle angemessene Stellung bringen.
8. Einführungsstelle wie für chirurgischen Eingriff reinigen. Schutzkleidung tragen (Maske, Schutzbrille, sterile Kleidung, sterile Handschuhe, Haube).
9. Venenpunktionsstelle unter Verwendung eines geeigneten Antiseptikums vorbereiten.
10. Wenn nötig, Lokalanästhesie durchführen. Soweit zur Garnitur gehörig, wird ein SharpsAway-Entsorgungsnäpfel zur Entsorgung der Kanülen verwendet. Nach Gebrauch Kanülen in das Schaumkissen stecken. Nach Beendigung des Vorgangs den ganzen Näpfel wegwerfen.

Vorsichtsmaßnahme: Kanülen nicht wiederverwenden, nachdem sie in den Entsorgungsnäpfel gelegt wurden, da Partikel der Nadelspitze anhaften können.

11. Alle nötigen Vorrichtungen vorbereiten. Schutz für Katheterspitze entfernen. Platzierungsdraht ca. 2,5 bis 3,8 cm vom vorgesehenen Katheterschnitt zurückziehen. **Warnung: Platzierungsdraht nicht abschneiden. Proximales Ende des Platzierungsdrahtes am Verbindungsstück mit Seitenanschluss abknicken.** Dadurch wird das Risiko, dass der Platzierungsdraht während der Einführung über die Spitze des Katheters hinausragt, auf ein Minimum herabgesetzt.^{14,15} Kontaminationsschutz zurückziehen, so dass der abzuschneidende Katheteranteil frei liegt. Mithilfe des Katheterkürzers den Katheter gerade (d.h. im Winkel von 90° zum Katheterquerschnitt) abschneiden, so dass die Spitze stumpf bleibt.
12. Spritze an den Seitenarm anschließen und distales Lumen mit steriler Kochsalzlösung spülen. Spritze liegen lassen. Katheter auf eine sterile Fläche legen.
13. Tourniquet wieder anlegen und Handschuhe durch sterile ersetzen.
14. Gebiet um die Einführungsstelle abdecken, um einen maximalen Schutz zu garantieren.
15. Vene unter Verwendung der abziehbaren Schleuse über der Kanüle punktieren. Wenn Blut zurückfließt, Kanüle mit der abziehbaren Schleuse als eine Einheit vorschieben, bis sich die Schleuse im Gefäß befindet.
16. Tourniquet öffnen.
17. Schleuse festhalten und Kanüle entfernen.
Warnung: Um das Risiko einer embolischen Verschleppung der Schleuse auf ein Minimum herabzusetzen, sollte die Kanüle nicht nochmals in die Schleuse eingeführt werden. Auf pulsierenden Blutfluß achten, der eine versehentliche Arterienpunktion anzeigt.
Vorsichtsmaßnahme: Die Farbe des Blutes ist nicht immer ein zuverlässiges Anzeichen für venösen Zugang.¹³
18. Distales Ende des Kontaminationsschutzes anfassen, zurückziehen, um die Katheterspitze zu entblößen und Katheter langsam durch die abziehbare Schleuse vorschieben. Bei gleichzeitigem Vorschieben löst sich der Kontaminationsschutz vom Katheter.
19. Wenn sich die Katheterspitze in der Axillarlinie befindet, Patienten in eine Lage bringen, welche die Gefahr einer Fehlpositionierung der Katheterspitze in der V. jugularis interna verringert.
Bei Erwachsenen: Den Patienten auffordern, den Kopf zum katheterisierten Arm hin zu wenden und das Kinn auf die Schulter zu legen.²⁰

Bei Kindern: Geeignete Anweisungen geben.

Wenn ein Widerstand beim Vorschieben des Katheters auftritt, diesen zurückziehen und/oder vorsichtig beim Vorschieben spülen.

20. Das Vorschieben des Katheters 5 cm vor Erreichen der vorbestimmten Einführungslänge unterbrechen.
21. Abziehbare Schleuse aus der Venenpunktionsstelle vollständig herausziehen.
22. Flügel der abziehbaren Schleuse anfassen und auseinander- und vom Katheter wegziehen, bis die Schleuse in ihrer ganzen Länge gespalten wird.
23. Katheter bis zur vorbestimmten Verweilposition vorschieben.
24. Luer-Lock/Seitenarm-Baugruppe und Platzierungsdraht als Einheit entfernen.
25. Katheterposition überprüfen, indem mittels Spritze aus dem distalen Lumen aufgezogen wird, bis freier Fluss von venösem Blut sichtbar wird. **Vorsichtsmaßnahme: Die Farbe des Blutes ist nicht immer ein zuverlässiges Anzeichen für venösen Zugang.**¹³
26. Lumen mit ausreichend Flüssigkeit spülen, um das Blut vollständig aus dem Lumen zu entfernen.
27. Katheterschwänzchen ggf. an die entsprechende Luer-Lock-Leitung anschließen. Der Anschluss kann auch entsprechend den üblichen Krankenhaus-/Praxisbestimmungen durch die Spritzenkappe „gesperrt“ werden. **Warnung: Dieses Produkt enthält eine verschiebbare Klemme, die versehentlich entfernt und u.U. von Kindern oder verwirrten Patienten aspiriert werden kann.** Unter derartigen Umständen sollte der Arzt die Klemme entfernen, wenn sie nicht benutzt wird. Die verschiebbare Klemme auf dem Schwänzchen dient dazu, während eines Leitungs- oder Spritzenkappenwechsels den Fluss durch das Lumen zu blockieren. **Vorsichtsmaßnahme: Um das Risiko einer Schädigung des Schwänzchens durch übermäßigen Druck auf ein Minimum herabzusetzen, muss die Klemme vor einer Infusion durch das Lumen geöffnet werden.**

Gebrauchsanweisung für Arrow-UserGard kanülenfreie

Spritzenansatzstück (sofern vorhanden):

- Luer-Ende des UserGard-Ansatzstückes auf die Spritze setzen.
- Spritzenkappe mit Alkohol oder Povidon-Jod entsprechend den Krankenhaus-/Praxisbestimmungen reinigen.
- Rote Staubkappe vom Ansatzstück entfernen.
- UserGard-Ansatzstück auf die Spritzenkappe drücken und drehen, bis es auf dem Stift einrastet (siehe Abb. 3).

- Nach Bedarf Flüssigkeit injizieren oder abnehmen.
- UserGard-Ansatzstück von der Spritzenkappe abnehmen und wegwerfen. **Warnung: UserGard-Ansatzstück nicht auf der Spritzenkappe belassen, um das Risiko einer Luftembolie auf ein Minimum herabzusetzen.** Nur zum Einmalgebrauch.

28. Einführungsstelle entsprechend den Krankenhaus-/Praxisbestimmungen reinigen.
29. Katheter fixieren. Sofern vorhanden, kann eine Katheterklemme, ein Katheterhalter, eine StatLock-Befestigungsvorrichtung oder SteriStrips verwendet werden.

Anweisungen für die StatLock-Befestigungsvorrichtung:

Erste Anwendung:

- Stelle, die verbunden werden soll, entsprechend den Krankenhaus-/Praxisbestimmungen reinigen und vorbereiten. Ein klebendes Mittel auf die Haut auftragen, um ein optimales Haften des StatLock zu erzielen. Gut trocknen lassen. Das Kissens der Befestigungsvorrichtung wird so platziert, daß sich seine Mitte 2,5 - 3,8 cm von der Katheter-Einführungsstelle entfernt befindet.
- Der Katheter kann mittels des Ansatzstückes für die Primärnaht am StatLock befestigt werden. **Vorsichtsmaßnahme: Manipulationen am Katheter sollten während des ganzen Verfahrens auf ein Minimum beschränkt werden, damit die Katheterspitze nicht verschoben wird. Der Katheter sollte unter dem Verband so platziert werden, daß dieser nicht auf den Katheter drückt.**

Befestigung des Ansatzstückes für die Primärnaht:

Wie zuvor ausgemessen, befindet sich das Ansatzstück für die Naht nach richtiger Katheterplatzierung 2,5 - 3,8 cm von der Einführungsstelle entfernt. Die Flügel des Ansatzstückes für die Naht über den Stützen des StatLocks plazieren und hinunterdrücken (siehe Abb. 4). Die Halteflügel des StatLock in die geschlossene Position einrasten lassen, um das Ansatzstück für die Naht zu befestigen (siehe Abb. 5).

- Rückenpapier von der einen Hälfte des StatLock-Befestigungskissens entfernen und StatLock auf die trockene, vorbereitete Haut drücken. Dasselbe für die andere Hälfte des StatLock durchführen.
- Sterilen Verband auf der Einführungsstelle entsprechend den üblichen Krankenhaus-/Praxisbestimmungen anlegen.
- Anbringung des StatLocks und Verbandes im Krankenblatt dokumentieren.

- StatLock und Verband den Krankenhaus-/Praxisbestimmungen entsprechend erneuern. Um ein bestmögliches Anhaften zu garantieren, sollte die StatLock-Befestigungsvorrichtung zumindest alle 7 Tage ersetzt werden.

Alternative Methode:

Entsprechend den Krankenhaus-/Praxisbestimmungen Steri-Strips und sterilen Verband bzw. Naht und sterilen Verband anlegen.

Vorsichtsmaßnahme: Nähte nicht an der Außenseite des Katheters anlegen, um das Risiko von Einstichen oder Beschädigungen des Katheters auf ein Minimum herabzusetzen und den Durchfluß nicht zu behindern.

Entfernung der StatLock-Befestigungsvorrichtung:

- Verband und Nähte entfernen (soweit zutreffend).
 - Die Halteflügel des StatLock öffnen und den Katheter von den StatLock-Stützen abnehmen (soweit zutreffend).
 - Alkoholtupfer auf das StatLock-Klebmittel halten und das Kissen vorsichtig von der Haut abheben.
 - Entfernung des StatLock im Krankenblatt des Patienten dokumentieren.
30. PEZK-Aufkleber auf dem Verband anbringen.
 31. Thoraxröntgen umgehend anfertigen, um die Platzierung der Spitze zu verifizieren. **Vorsichtsmaßnahme: Das Röntgen muß den Katheter auf der rechten Seite des Mediastinums in der V. cava superior oberhalb ihrer Einmündung in den rechten Vorhof und parallel zur Gefäßwand zeigen,^{10,23} wobei sich die distale Spitze über der V. azygos oder der Carina der Trachea, je nachdem was besser sichtbar ist, befinden muß.** Falls die Katheterspitze nicht richtig liegt, platzieren Sie diese erneut und kontrollieren Sie die Lage nochmals. **Vorsichtsmaßnahme: Wenn sich die Katheterspitze im Röntgen nicht gut darstellt, kann eine kleine Menge Kontrastmittel injiziert werden, um die Spitze besser zu lokalisieren.¹⁴**
 32. Aufkleber für das Krankenblatt vorbereiten und auf das Krankenblatt kleben. Beurteilungen und Einführung dokumentieren.
 33. Die Position der Katheterspitze routinemäßig mittels Zentimetermarkierung am Katheter überprüfen.

Heparinisierung:

1. Verschiedene Heparinkonzentrationen können dazu benutzt werden, den Katheter durchgängig zu halten. Die Menge Heparin (sofern verwendet) und die Häufigkeit der Spülungen hängt von der Meinung des Arztes, den Krankenhaus-/Praxisbestimmungen und dem Zustand des Patienten ab.^{3,8}
2. Das Volumen der Heparinlösung sollte dem Volumen des Lumens entsprechen, das „verschlossen“ werden soll, oder etwas größer sein. Das Katheterfüllvolumen finden Sie auf der Packung.

Katheterentfernung:

1. Verband und Nähte entfernen (soweit zutreffend). **Vorsichtsmaßnahme: Zur Entfernung des Verbandes sollte keine Schere verwendet werden, um das Risiko eines Ein- oder Durchschneidens des Katheters auf ein Minimum herabzusetzen.**
2. Die Halteflügel des StatLock öffnen und den Katheter von den StatLock-Stützen abnehmen (soweit zutreffend).
3. Katheter durch langsames Ziehen parallel zur Haut entfernen. **Vorsichtsmaßnahme: Sollten Schwierigkeiten bei der Katheterentfernung auftreten, keine übermäßige Kraft anwenden, um das Risiko eines Einreißen des Katheters auf ein Minimum herabzusetzen.** Beim Auftreten eines Widerstandes sollte 20-30 Minuten lang lokal Wärme angewendet werden.^{16,25} Danach Katheter vorsichtig parallel zur Haut herausziehen. Wenn weiterhin Schwierigkeiten auftreten, sollte ein Röntgen durchgeführt und der Arzt zu Rate gezogen werden.
4. Nach Entfernung des Katheters sollte dieser gemessen und überprüft werden, um sicherzustellen daß er in seiner ganzen Länge entfernt wurde.
5. Alkoholtupfer auf das StatLock-Klebmittel halten und das Kissen vorsichtig von der Haut abheben (soweit zutreffend).
6. Einführungsstelle verbinden.
7. Entfernung des Katheters und ggf. des StatLock im Krankenblatt des Patienten dokumentieren.

Arrow International, Inc. empfiehlt dem Benutzer, die angegebene Literatur zu lesen.

* Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Literaturangaben wünschen, wenden Sie sich bitte an Arrow International, Inc.

Catetere accorciabile a inserimento periferico per vena centrale con guida metallica di posizionamento

Considerazioni in merito alla sicurezza ed all'efficacia:

Non usare se la confezione è stata aperta o manomessa. **Avvertenza: Prima dell'uso, leggere tutte le avvertenze, precauzioni e istruzioni stampate nel foglietto illustrativo. La mancata osservanza di tali avvertenze, precauzioni e istruzioni potrebbe comportare gravi lesioni al paziente, e persino provocarne la morte.**

Non alterare il catetere o qualsiasi altro componente del kit/set durante l'inserimento, l'uso o la rimozione ad eccezione di quanto indicato.

La procedura deve essere effettuata da personale addestrato, molto esperto nei punti di riferimento anatomici, sicuro nella tecnica ed in grado di affrontare eventuali complicazioni.

Avvertenza: Non inserire il catetere nell'atrio destro o nel ventricolo destro né lasciarlo inserito (fare riferimento alla Fig. 1).

Tamponamento cardiaco: è stato documentato in molti articoli scientifici di autori diversi che l'introduzione di cateteri permanenti nell'atrio destro è una pratica pericolosa^{1,2,4,5,7,17,18} che può provocare perforazione e tamponamento cardiaco.^{1,2,4,5,17,18} Sebbene il tamponamento cardiaco causato da effusione pericardica sia inconsueto, è tuttavia associato ad un alto tasso di mortalità.²¹ I medici che eseguono l'inserimento dei cateteri nella vena centrale devono essere a conoscenza di questa complicazione potenzialmente fatale prima di far avanzare troppo il catetere in relazione alla corporatura del paziente.

Non esistono particolari percorsi o tipi di catetere che possano garantire l'assenza di questa complicazione potenzialmente fatale.¹⁸ La posizione effettiva della punta del catetere permanente deve essere confermata mediante radiografia dopo l'inserimento.^{1,2,5,16,18,22} I cateteri per vena centrale devono essere collocati nella vena cava superiore^{1,2,4,5,7,17,23} sopra la congiunzione della stessa con l'atrio destro e parallelamente alle pareti del vaso^{10,23} in modo che la punta distale si trovi ad un livello superiore rispetto alla vena azygos o alla carena tracheale, scegliendo quella che è maggiormente in evidenza.

I cateteri per vena centrale non vanno collocati nell'atrio destro, a meno che non sia specificamente richiesto per particolari procedure a termine relativamente breve, come ad esempio, l'aspirazione di emboli gassosi durante interventi neurochirurgici. Simili procedure sono nondimeno rischiose e devono essere rigorosamente monitorate e controllate.

Indicazioni per l'uso:

Il catetere per vena centrale a inserimento periferico consente l'accesso venoso alla circolazione centrale tramite una vena periferica e rappresenta un metodo alternativo di terapia endovenosa per determinati pazienti adulti e pediatrici.

Controindicazioni:

Nessuna nota.

Avvertenze e precauzioni:*

1. **Avvertenza: Sterile, monouso: non riutilizzare, ricondizionare o sterilizzare. Il riutilizzo del dispositivo crea un rischio potenziale di gravi lesioni e/infezioni che possono risultare fatali**
2. **Avvertenza: Non inserire il catetere nell'atrio destro o nel ventricolo destro né lasciarlo inserito. I cateteri per vena centrale devono essere posizionati in modo tale che la punta distale del catetere si trovi nella vena cava superiore (VCS), sopra la congiunzione della VCS con l'atrio destro, e che giaccia parallela alle pareti del vaso.**
3. **Avvertenza: I medici devono essere a conoscenza delle complicazioni associate all'uso dei cateteri per vena centrale, inclusi tamponamento cardiaco dovuto alla perforazione delle pareti del vaso, perforazione atriale o ventricolare, lesioni pleuriche e mediastiniche, embolia gassosa, embolia da catetere, lacerazione del dotto toracico, batteriemia, setticemia, trombosi, involontaria puntura dell'arteria, lesioni ai nervi, formazione di ematoma, emorragia e disritmie.**
4. **Avvertenza: Non esercitare forza eccessiva durante la collocazione o la rimozione del catetere. Se la collocazione o la rimozione non potessero essere facilmente effettuate, si dovrà eseguire una radiografia toracica e richiedere un ulteriore consulto.**
5. **Avvertenza: Il medico deve essere a conoscenza dei problemi potenziali di embolia gassosa associati all'aver lasciato aperti aghi o cateteri nei siti di iniezione nella vena centrale o come conseguenza di scollegamenti involontari. Per ridurre il rischio di embolia gassosa, con questo dispositivo usare esclusivamente connessioni a blocco luer strettamente serrate. Attenersi al protocollo ospedaliero/clinico onde evitare il rischio di embolia gassosa per tutto il tempo di permanenza del catetere.**
6. **Avvertenza: Il medico deve essere a conoscenza delle condizioni cliniche che possono limitare l'uso dei cateteri centrali per inserimento periferico, condizioni quali: dermatiti, cellulite**

e bruciature sul sito di inserimento o nelle immediate vicinanze, precedenti trombosi venose omolaterali, radioterapia, contratture, mastectomie e uso potenziale per fistola atrioventricolare (AV).

7. Avvertenza: Per ridurre al minimo il rischio di danneggiare il catetere, se si rimuove la guida metallica di posizionamento prima di inserire il catetere, non tentare poi di reinserirla.
8. Avvertenza: A causa del rischio di esposizione all'HIV (Virus dell'immunodeficienza umana) o ad altri agenti patogeni a trasmissione ematica, il personale sanitario deve abitualmente attenersi alla prassi universale riguardo le precauzioni per sangue e fluidi corporei nella cura di tutti i pazienti.
9. Precauzione: I cateteri permanenti devono essere ispezionati regolarmente per verificare che la portata sia quella desiderata, che la medicazione sia ben applicata, che il catetere sia posizionato correttamente e che le connessioni a blocco Luer siano sicure. Usare le tacche dei centimetri per controllare se la posizione del catetere sia cambiata.
10. Precauzione: Soltanto mediante esame radiografico dell'ubicazione del catetere ci si può assicurare che la punta del catetere non sia entrata nel cuore e che giaccia parallelamente alla parete del vaso. Se la posizione del catetere è mutata, eseguire immediatamente un esame radiografico al torace per confermare la posizione dell'estremità del catetere.
11. Precauzione: L'alcol e l'acetone possono indebolire la struttura dei materiali in poliuretano. Leggere l'elenco degli ingredienti dei prodotti spray e dei tamponi impiegati per la preparazione del paziente per verificare che non contengano acetone o alcol.
Acetone: Non impiegare acetone sulla superficie del catetere. L'acetone può essere applicato alla cute, ma deve essere lasciato asciugare completamente prima di applicare la fasciatura.
Alcol: Non impiegare alcol per bagnare la superficie del catetere né per rendere nuovamente pervio il catetere. È necessario prestare particolare attenzione durante l'instillazione di farmaci contenenti alte concentrazioni di alcol. Lasciare sempre asciugare completamente l'alcol prima di applicare la fasciatura.
Questi agenti, inoltre, possono indebolire il legame adesivo tra il dispositivo di ancoraggio StatLock e la cute.
12. Precauzione: Alcuni disinfettanti usati sul sito di inserimento del catetere contengono solventi, che possono intaccare il materiale del catetere. Prima di applicare la fasciatura, accertarsi che il sito di inserimento sia asciutto.

13. Precauzione: Le indicazioni per l'uso nei bambini sono uguali a quelle per gli adulti; tuttavia, le tecniche di inserimento sono spesso modificate in base all'età e alla corporatura del bambino. Se il medico non è esperto nell'uso di questo prodotto su un bambino, deve richiedere un consulto appropriato.
14. Precauzione: Quando si posiziona un catetere con l'estremità distale situata in un vaso prossimale alla vena cava superiore (clavicolare media o linea mediana), i medici devono essere a conoscenza del rischio di tromboflebiti indotte chimicamente.¹¹ Quando si somministrano soluzioni di glucosio con concentrazione maggiore del 10%/nutrizione parenterale totale, medicazioni con osmolarità superiore a 600 mOsm/litro, medicazioni con osmolarità compresa tra 400 e 600 mOsm/litro per oltre 4 settimane, o medicazioni note per le irritazioni che possono causare ai vasi vicini alla vena cava, l'estremità del catetere deve essere collocata nella circolazione centrale.¹⁹
15. Precauzione: Per ridurre al minimo il rischio di danni al catetere causati dalla pressione, non sottoporre a pressioni superiori a 50 psi. Pressioni elevate possono esser causate in genere dai seguenti fattori: siringhe più piccole di 10 cc usate per irrigare o liberare un catetere ostruito (una siringa da 1 cc piena di fluido può superare i 300 psi⁶), determinate procedure radiografiche e pompe di infusione con limiti di pressione di occlusione superiori a 50 psi.
16. Precauzione: Il dispositivo di ancoraggio StatLock deve essere controllato regolarmente per verificare che aderisca alla cute e sia collegato al catetere. Usare le tacche dei centimetri sul corpo del catetere per controllarne la posizione.

Procedura suggerita:

Usare una tecnica sterile.

1. Verificare la prescrizione del medico. La prescrizione del medico deve prevedere una radiografica toracica successiva al posizionamento.
2. Spiegare la procedura al paziente e, a seconda delle circostanze, invitarlo/la a firmare il consenso informato.
3. Misurare e annotare la circonferenza della parte superiore del braccio.
4. Con il laccio emostatico, individuare la vena appropriata per l'inserimento.
Adulto: I cateteri centrali per inserimento periferico si inseriscono generalmente nella vena basilica, cubitale media o cefalica (fare riferimento alla Fig. 2).
Bambino: I cateteri centrali per inserimento periferico si inseriscono generalmente in una vena basilica, cefalica, una vena del cuoio capelluto o

nella safena.⁹ Quale vena sia più adatta, dipende dalla corporatura e dall'età del bambino.

5. Rilasciare il laccio emostatico lasciandolo sotto il braccio.

6. Misurare il paziente per determinare la lunghezza del catetere necessario per posizionare l'estremità distale nella VCS.

Adulto: Estendere il braccio per una distanza compresa tra 45 e 90 gradi dal corpo. Misurare la distanza dal sito di inserimento lungo quello che si prevede sarà il corso anatomico del vaso da cateterizzare. L'estremità del catetere deve trovarsi nel tratto distale della VCS pari ad un terzo della stessa, parallela alle pareti di questa e sopra l'atrio destro. Se si usa un dispositivo di ancoraggio StatLock, aggiungere una lunghezza compresa tra 2,5 e 3,8 cm alla lunghezza del catetere.

Bambino: Misurare la distanza dal sito di inserimento lungo quello che si prevede sarà il corso anatomico del vaso da cateterizzare. L'estremità del catetere deve trovarsi nel tratto distale della VCS pari ad un terzo della stessa, parallela alle pareti di questa e sopra l'atrio destro. Quando il sito di inserimento è la vena safena, l'estremità del catetere deve trovarsi nel tratto distale della vena cava inferiore (VCI) pari ad un terzo della stessa, parallela alle pareti di questa e sotto l'atrio destro. Se si usa un dispositivo di ancoraggio StatLock, aggiungere una lunghezza compresa tra 2,5 e 3,8 cm alla lunghezza del catetere.

7. Posizionare il paziente per l'inserimento.

Adulto: Collocare il paziente nella posizione appropriata in base al sito di inserimento. Estendere il braccio lateralmente per una distanza compresa tra 45 e 90 gradi dal corpo.

Bambino: Collocare il paziente nella posizione appropriata in base al sito di inserimento.

8. Lavarsi per prepararsi all'intervento. Indossare indumenti protettivi (maschera, occhiali, camicia, guanti sterili e una cuffia per i capelli).

9. Preparare il sito per la venopuntura usando antisettici adeguati.

10. Iniettare l'anestetico locale sul sito di inserimento. Nei kit che lo prevedono, si usa un contenitore SharpsAway per lo smaltimento degli aghi. Dopo l'uso, premere gli aghi nella schiuma e, al termine della procedura, gettare l'intero contenitore.

Precauzione: Non riadoperare gli aghi che siano stati riposti nel contenitore per lo smaltimento, in quanto è possibile che le estremità siano contaminate da particelle che vi hanno aderito.

11. Preparare tutte le attrezzature. Rimuovere la protezione dall'estremità del catetere. Ritrarre la guida metallica di posizionamento di circa 2,5 - 3,8 cm rispetto al punto in cui si intende tagliare il catetere. **Avvertenza: Non tagliare la guida metallica di posizionamento.** Attorcigliare

l'estremità prossimale della guida metallica di posizionamento in corrispondenza del connettore con bocchetta laterale. In questo modo si riduce al minimo il rischio che la guida metallica di posizionamento vada oltre l'estremità distale del catetere durante l'inserimento.^{14,15} Staccare la protezione da contaminazione esponendo la porzione di catetere da tagliare. Con l'apposita taglierina, recidere il catetere trasversalmente (di 90 gradi rispetto alla sezione trasversale del catetere) per mantenere la smussatura della punta.

12. Collegare la siringa al braccio laterale e sciacquare il lume distale con soluzione fisiologica sterile. Lasciare la siringa in posizione. Sistemare il catetere in campo sterile.

13. Riapplicare il laccio emostatico e rimettersi i guanti sterili.

14. Sistemare un telo sterile per ottenere la massima protezione.

15. Usando una guaina rimovibile sull'ago, effettuare la venopuntura. Una volta stabilito il ritorno di flusso, far avanzare insieme l'ago con la guaina rimovibile finché la guaina non si trova correttamente all'interno del vaso.

16. Rilasciare il laccio emostatico.

17. Tenere ferma la guaina e rimuovere l'ago. **Avvertenza: Per ridurre al minimo il rischio di embolia gassosa, non reinserire l'ago nella guaina.** Controllare l'eventuale presenza di flusso pulsatile che indica l'involontaria puntura di un'arteria. **Precauzione: Il colore del sangue non è sempre un indicatore attendibile che sia stata effettivamente raggiunta la vena.¹³**

18. Afferrare l'estremità distale della protezione da contaminazione, tirare per scoprire la punta del catetere e far avanzare lentamente il catetere nella guaina rimovibile. La protezione da contaminazione si stacca dal catetere durante l'inserimento.

19. Quando l'estremità del catetere raggiunge il livello della linea ascellare, sistemare il paziente in modo da ridurre la possibilità di un posizionamento errato dell'estremità del catetere nella vena giugulare interna.

Adulto: invitare il paziente a girare la testa verso il braccio in cui è stato inserito il catetere e abbassare il mento sulla spalla.²⁰

Bambino: fornire le istruzioni nella maniera adeguata.

Se si avverte resistenza durante l'avanzamento del catetere, ritirarlo e/o irrigare con cautela durante l'avanzamento.

20. Arrestare l'avanzamento del catetere a 5 cm prima di raggiungere la lunghezza di inserimento pre stabilita.

21. Estrarre la guaina rimovibile dal sito di venopuntura.

22. Afferrare le linguette della guaina e tirarle fino a separarle del tutto, staccando la guaina dal catetere.
23. Continuare a far avanzare il catetere fino al raggiungimento della posizione finale permanente.
24. Rimuovere il gruppo del braccio laterale con blocco Luer e la guida metallica di posizionamento come un unico pezzo.
25. Controllare il posizionamento del catetere con la siringa aspirando attraverso il lume distale, finché non appare il flusso di sangue venoso.
Precauzione: Il colore del sangue non è sempre un indicatore attendibile che sia stata effettivamente raggiunta la vena.¹³
26. Sciacquare il lume con una quantità sufficiente di soluzione per eliminare completamente il sangue aspirato al suo interno.
27. Collegare la spirulina alla linea a blocco Luer appropriata, secondo necessità. In alternativa, è possibile "bloccare" la bocchetta mediante l'apposito cappuccio attenendosi al protocollo ospedaliero standard. **Avvertenza: Questo prodotto contiene un morsetto scorrevole che può essere rimosso involontariamente, e potenzialmente aspirato da bambini o adulti in stato confusionale.** In queste situazioni, è opportuno che il medico rimuova il morsetto quando questo non viene usato. La spirulina è dotata di un morsetto scorrevole per ostruire il flusso attraverso il lume durante il cambio di linea e cappuccio di iniezione. **Precauzione: Per ridurre al minimo il rischio di danni alla spirulina a causa di una pressione eccessiva, il morsetto deve essere aperto prima dell'infusione attraverso il lume.**

Attacco per iniezione senza ago UserGard Arrow (se fornito)

Istruzioni per l'uso:

- Fissare l'estremità Luer dell'attacco UserGard alla siringa.
- Preparare il cappuccio di iniezione irrorandolo con alcool o polivinilpirrolidone-iodio secondo il protocollo ospedaliero/clinico standard.
- Rimuovere il cappuccio rosso di protezione dall'attacco.
- Premere l'attacco UserGard sul cappuccio di iniezione e fissarlo sul perno con un movimento di torsione (fare riferimento alla Fig. 3).
- Iniettare o aspirare il fluido a seconda delle esigenze.
- Disinnestare l'attacco UserGard dal cappuccio di iniezione e gettarlo. **Avvertenza: Per ridurre al minimo il rischio potenziale di embolia**

gassosa, non lasciare l'attacco UserGard collegato al cappuccio di iniezione. Non riutilizzare.

28. Pulire il sito di inserimento secondo il protocollo ospedaliero/clinico.
29. Fissare saldamente il catetere. Se disponibile, si può usare un morsetto, un fermo, il dispositivo di ancoraggio StatLock o cerotti Steri-Strips.

Istruzioni del dispositivo di ancoraggio StatLock:

Applicazione iniziale:

- Pulire e preparare il sito previsto per l'intervento secondo il protocollo ospedaliero/clinico. Il preparato cutaneo va applicato per coprire la cute e massimizzare l'aderenza dello StatLock. Far asciugare del tutto. Collocare la compressa dell'ancora in modo che il suo punto centrale si trovi ad una distanza compresa tra 2,5 e 3,8 cm dal sito di inserimento del catetere.
- Il catetere può essere fissato allo StatLock mediante l'attacco di sutura primario. **Precauzione: Limitare i movimenti del catetere nel corso dell'intera procedura per preservare il corretto posizionamento dell'estremità. Sistemare il catetere sotto la medicazione in modo da evitare eventuali deformazioni.**

Fissaggio con attacco di sutura primario:

In base alle misurazioni precedenti, dopo aver effettuato il posizionamento corretto del catetere, l'attacco di sutura primario si trova ad una distanza compresa tra 2,5 e 3,8 cm dal sito di inserimento. Collocare le alette dell'attacco di sutura sulle basi dello StatLock e premere (fare riferimento alla Fig. 4). Fissare con uno scatto le alette di fermo nella posizione di chiusura per fissare l'attacco di sutura (fare riferimento alla Fig. 5).

- Rimuovere la carta adesiva da una metà della compressa dell'ancora StatLock e premere sulla cute preparata e asciutta. Quindi rimuovere la carta sull'altra metà della compressa.
- Completare la medicazione sterile sul sito di inserimento secondo il protocollo ospedaliero/clinico.
- Documentare la procedura di medicazione/applicazione dello StatLock sulla cartella clinica del paziente.
- Sostituire la medicazione/dispositivo StatLock secondo il protocollo ospedaliero. Il dispositivo di ancoraggio StatLock deve essere sostituito almeno ogni 7 giorni perché sia garantita la massima aderenza.

Tecnica alternativa:

Applicare cerotti Steri-Strips e la medicazione sterile o applicare la sutura e la medicazione sterile

secondo il protocollo ospedaliero. **Precauzione: Non suturare direttamente sul diametro esterno del catetere per ridurre al minimo il rischio di tagliare o danneggiare il catetere o di impedirne il flusso.**

Rimozione del dispositivo di ancoraggio StatLock:

- Rimuovere la medicazione e le suture eventualmente presenti.
 - Aprire le alette di fermo dello StatLock e rimuovere il catetere dalle basi dello StatLock (se pertinente).
 - Applicare un bastoncino cotonato imbevuto di alcool all'adesivo dello StatLock e sollevare con delicatezza la compressa dalla cute.
 - Documentare la procedura di rimozione del StatLock sulla cartella clinica del paziente.
30. Applicare l'etichetta del catetere centrale per inserimento periferico sulla medicazione.
31. Effettuare immediatamente una radiografia toracica per verificare il posizionamento dell'estremità. **Precauzione: Dall'esame radiografico deve risultare che il catetere si trova sul lato destro del mediastino all'interno della VCS, sopra la giunzione della stesa con l'atrio destro e parallelo alle pareti del vaso,^{10,23} mentre l'estremità distale deve trovarsi ad un livello superiore rispetto alla vena azygos o alla carena tracheale, a seconda di quella delle due che è maggiormente in evidenza.** Se la punta del catetere non è posizionata correttamente, riposizionarla e ripetere la verifica. **Precauzione: Se si incontrano difficoltà a visualizzare l'estremità del catetere con la radiografia, si può iniettare una piccola quantità di liquido di contrasto per facilitare il posizionamento.¹⁴**
32. Compilare l'etichetta adesiva e attaccarla sulla cartella clinica del paziente. Documentare le valutazioni e la procedura di inserimento.
33. Controllare regolarmente la posizione dell'estremità del catetere usando le tacche dei centimetri segnate sul catetere stesso.

Trattamento con eparina:

1. Per preservare la pervietà del catetere è possibile usare una molteplicità di concentrazioni di soluzioni "bloccanti". La quantità di eparina eventualmente usata e la frequenza delle irrigazioni dipendono dalla preferenza del medico, dal protocollo ospedaliero/clinico e dalla condizione del paziente.^{3,8}
2. Il volume della soluzione di eparina deve essere pari o leggermente superiore al volume del lume da bloccare. Il volume di riempimento del catetere è stampato sulla confezione del prodotto.

Procedura di rimozione del catetere:

1. Rimuovere la medicazione e le suture eventualmente presenti. **Precauzione: Per ridurre al minimo il rischio di tagliare il catetere, non usare forcipi per rimuovere la medicazione.**
2. Aprire le alette di fermo dello StatLock e rimuovere il catetere dalle basi dello StatLock (se pertinente).
3. Rimuovere il catetere tirandolo lentamente in parallelo alla cute. **Precauzione: Per ridurre al minimo il rischio di rottura del catetere, non esercitare forza eccessiva se la rimozione non potesse essere effettuata facilmente.** Se si avverte resistenza, riscaldare l'area per 20-30 minuti,^{16,25} quindi iniziare a tirare con cautela parallelamente alla cute. Se le difficoltà persistono, eseguire una radiografia e richiedere un ulteriore consulto.
4. Dopo la rimozione del catetere, controllare che il catetere sia stato completamente rimosso misurandone la lunghezza.
5. Applicare un bastoncino cotonato imbevuto di alcool all'adesivo dello StatLock e sollevare con delicatezza la compressa dalla cute (se pertinente).
6. Medicare il sito di inserimento.
7. Documentare la rimozione del catetere e la procedura di rimozione dello StatLock (se pertinente) sulla cartella clinica del paziente.

La Arrow International, Inc. consiglia ai medici di familiarizzarsi con le opere scientifiche appropriate.

*In caso di quesiti o per ulteriori informazioni su questo argomento, rivolgersi alla Arrow International, Inc.

Produto Cateter Venoso Central Aparável de Introdução Periférica com Fio de Colocação

Considerações Sobre Segurança e Eficácia:

Não utilizar caso a embalagem tenha sido previamente aberta ou danificada. **Aviso: Antes de utilizar, leia todas as advertências, precauções e instruções constantes no folheto acompanhante. Se não o fizer, poderá provocar lesões graves ou mesmo a morte do doente.**

Não alterar o cateter ou qualquer outro componente do kit/conjunto durante a introdução, uso ou remoção, excepto conforme instruído.

O procedimento deve ser realizado por pessoal treinado, bastante conhecedor das referências anatómicas, da técnica mais segura e das suas potenciais complicações.

Aviso: Não colocar nem deixar que o cateter permaneça na aurícula ou ventrículo direitos (consulte a Fig. 1).

Tamponamento Cardíaco:

Tem sido documentado por muitos autores que a colocação de cateteres permanentes na aurícula direita é uma prática perigosa^{1,2,4,5,7,17,18} que pode dar origem a perfuração cardíaca e tamponamento.^{1,2,4,5,17,18} Apesar do tamponamento cardíaco causado por derrame pericárdico ser pouco comum, existe uma elevada taxa de mortalidade alta associada ao mesmo.²¹ Os médicos que colocam cateteres venosos centrais devem estar familiarizados com esta complicação potencialmente fatal, antes de introduzirem excessivamente o cateter em relação à estatura do doente.

Nenhum percurso específico ou tipo de cateter está isento de provocar esta complicação potencialmente fatal.¹⁸ A posição exacta da ponta do cateter permanente deve ser confirmada com uma radiografia executada após a introdução.^{1,2,5,16,18,22} Os cateteres venosos centrais devem ser colocados na veia cava superior,^{1,2,4,5,7,17,23} por cima da junção da mesma com a aurícula direita e paralelamente à parede do vaso,^{10,23} e a sua ponta distal colocada a um nível superior ao da veia ázigos ou da carina da traqueia, dependendo da que se veja melhor.

Os cateteres venosos centrais não devem ser colocados na aurícula direita, a não ser que seja especificamente necessário para procedimentos com duração relativamente pequena, como por exemplo a aspiração de embolos gasosos durante intervenções neurocirúrgicas. Contudo, estes procedimentos conduzem a riscos e devem ser monitorizados e controlados com muita atenção.

Indicações para a Utilização:

O Cateter Venoso Central de Introdução Periférica permite o acesso venoso à circulação central através de uma veia periférica. Oferece um método alternativo para a terapêutica intravenosa para certos doentes seleccionados, quer sejam adultos ou crianças.

Contra-indicações:

Desconhecidas.

Advertências e Precauções:*

- 1. Aviso: Estéril, utilização única: não reutilizar, reprocessar ou reesterilizar. A reutilização do dispositivo cria um potencial risco de lesões graves e/ou infecção que poderão resultar em morte.**
- 2. Aviso: Não colocar nem deixar que o cateter permaneça na aurícula ou ventrículo direitos. Os cateteres venosos centrais devem ser colocados de maneira a que a sua ponta distal se encontre na veia cava superior (VCS) por cima da junção desta com a aurícula direita e paralelamente à parede do vaso.**
- 3. Aviso: Os médicos devem estar familiarizados com as complicações associadas a cateteres venosos centrais, incluindo o tamponamento cardíaco causado por perfuração ventricular, auricular ou da parede do vaso, lesões pleurais e mediastínicas, embolia gasosa, embolia do cateter, laceração do ducto torácico, bacteriemia, septicemia, trombose, punção arterial accidental, lesão nervosa, formação de hematoma, hemorragia e disritmias.**
- 4. Aviso: Não aplique força excessiva durante a colocação ou remoção do cateter. Se a colocação ou remoção não forem fáceis, deverá ser realizada uma radiografia torácica e procurada assistência mais diferenciada.**
- 5. Aviso: O médico deve estar familiarizado com os potenciais problemas de embolia gasosa que poderão ocorrer se deixar agulhas ou cateteres abertos em locais de punção venosa, ou em consequência de desconexões accidentais. Para diminuir o risco de embolia gasosa, só deverão ser utilizadas com este dispositivo conexões Luer-Lock bem apertadas. Siga o protocolo hospitalar ou da instituição em tudo o que diz respeito à manutenção de cateteres, a fim de prevenir uma embolia gasosa.**
- 6. Aviso: O médico deve estar familiarizado com condições clínicas que podem limitar a**

utilização de cateteres venosos centrais para introdução periférica, tais como: dermatite, celulite e queimaduras no ponto de introdução ou perto do ponto de introdução, trombose venosa ipsilateral anterior, radioterapia, contracturas, mastectomia e possível uso para fistula arteriovenosa.

7. **Aviso:** Para minimizar o risco de danos no cateter, caso o fio de colocação seja retirado antes da introdução do cateter, não tente reintroduzir o fio de colocação.
8. **Aviso:** Devido ao risco de exposição ao VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana) ou a outros agentes patogénicos transmitidos pelo sangue, todos os profissionais de saúde devem utilizar como rotina métodos universais de prevenção quando lidam com sangue e fluidos corporais de qualquer doente.
9. **Precaução:** Os cateteres permanentes devem ser inspeccionados regularmente para verificação do fluxo pretendido, da fixação do penso, do correcto posicionamento do cateter e da estabilidade da conexão Luer-Lock. Utilize as marcas em centímetros para detectar eventuais mudanças na posição do cateter.
10. **Precaução:** Um exame radiográfico da colocação do cateter é a única maneira de assegurar que a ponta não penetrou o coração, ou que o cateter deixou de estar colocado paralelamente à parede do vaso. Se a posição do cateter mudou, efectue imediatamente um exame radiográfico para confirmar a posição da ponta do cateter.
11. **Precaução:** O álcool e a acetona podem enfraquecer a estrutura dos materiais de poliuretano. Verifique se os ingredientes dos sprays e compressas de desinfeção incluem acetona ou álcool.
Acetona: Não utilize acetona sobre a superfície do cateter. A acetona pode ser aplicada sobre a pele, mas deve secar completamente antes de ser aplicado o penso.
Álcool: Não utilize álcool para molhar a superfície do cateter nem para restabelecer a permeabilidade do mesmo. **Precaução:** Deverá haver cautela quando forem instilados fármacos que contenham altas concentrações de álcool. Deixe sempre o álcool secar completamente antes de aplicar o penso.
Estes agentes podem também enfraquecer a união adesiva entre o Dispositivo de Fixação StatLock e a pele.
12. **Precaução:** Alguns desinfetantes utilizados no local de introdução do cateter contêm solventes, os quais podem atacar o material do cateter.

Certifique-se de que o local de introdução está seco antes de aplicar o penso.

13. **Precaução:** As indicações para a utilização deste dispositivo em crianças são iguais às dos adultos; contudo, as técnicas de introdução são muitas vezes modificadas de acordo com a idade e o tamanho da criança. Se o médico não tem experiência com a utilização deste dispositivo em crianças, deve procurar ajuda junto de um colega mais diferenciado.
14. **Precaução:** Quando o cateter for colocado com a ponta distal localizada num vaso proximal à VCS (na linha médio-clavicular ou na linha média), os médicos devem estar familiarizados com o risco de tromboflebite induzida quimicamente.¹¹ Aquando da administração de uma solução de glicose a mais de 10%/nutrição parentérica total, de quaisquer medicamentos com uma osmolaridade superior a 600 mOsm/litro, de medicamentos com uma osmolaridade entre 400 e 600 mOsm/litro durante um período superior a 4 semanas, ou qualquer medicamento que produza irritações em vasos proximais relativamente à veia cava, a ponta do cateter deve estar localizada na circulação central.¹⁹
15. **Precaução:** Para minimizar os riscos de danificar o cateter devido a pressão, não o exponha a pressões superiores a 50 psi. As causas comuns de uma pressão potencialmente alta incluem: seringas com capacidade inferior a 10 cc utilizadas para irrigar ou remover coágulos de um cateter obstruído (uma seringa de 1 cc cheia de líquido pode exceder 300 psi⁶), certos procedimentos radiográficos, e bombas de infusão com limites de pressão de oclusão superiores a 50 psi.
16. **Precaução:** O Dispositivo de Fixação StatLock deve ser inspeccionado regularmente para verificar a sua aderência à pele e a sua conexão ao cateter. Deve-se também verificar simultaneamente a posição do cateter utilizando as marcas em centímetros no corpo do cateter.

Procedimento Sugerido: Utilize uma técnica estéril.

1. Verifique a ordem do médico; esta deve incluir uma radiografia do tórax depois da colocação do cateter.
2. Explique o procedimento ao doente e solicite a sua assinatura do consentimento informado correspondente.
3. Meça e anote a circunferência do braço superior.
4. Utilizando um garrote conforme for necessário, identifique a veia apropriada para a introdução.

Adulto: Os cateteres venosos centrais para introdução periférica geralmente são introduzidos na veia basilíca, cubital mediana ou cefálica (consulte a Fig. 2).

Crianças: Os cateteres venosos centrais para introdução periférica geralmente são introduzidos na veia basilíca, cefálica, do couro cabeludo ou na veia safena.⁹ A veia mais adequada depende da estatura e maturidade da criança.

5. Desaperte o garrote e deixe-o em posição debaixo do braço.

6. Meça o doente para determinar o comprimento do cateter necessário para colocar a ponta distal na veia cava superior.

Adultos: Estenda o braço a uma distância de aproximadamente 45 a 90 graus do tronco. Meça a distância a partir do ponto de introdução, ao longo do trajecto anatómico previsto do vaso a ser cateterizado. A ponta do cateter deve ficar no terço distal da veia cava superior (VCS) por cima da aurícula direita e paralela à parede da mesma veia cava superior (VCS). Se for utilizado um Dispositivo de Fixação StatLock, adicione 2,5 a 3,8 cm à medida do cateter.

Crianças: Meça a distância a partir do ponto de introdução, ao longo do trajecto anatómico previsto do vaso a ser cateterizado. A ponta do cateter deve ficar no terço distal da veia cava superior (VCS), acima da aurícula direita e paralela à parede da veia cava superior (VCS). Quando o ponto de introdução for a veia safena, a ponta do cateter deve ficar no terço distal da veia cava inferior (VCI), abaixo da aurícula direita e paralela à parede da veia cava inferior (VCI). Se for utilizado um Dispositivo de Fixação StatLock adicione 2,5 a 3,8 cm à medida do cateter.

7. Coloque o doente em posição para efectuar a introdução.

Adultos: Coloque o doente na posição adequada para o local da introdução. Afaste o braço lateralmente, até 45 a 90 graus do tronco.

Crianças: Coloque o doente na posição adequada para o local da introdução.

8. Desinfecte o local de introdução. Utilize vestuário de protecção (máscara, óculos protectores, bata e luvas esterilizadas e touca para o cabelo).

9. Prepare o local da punção venosa utilizando os anti-sépticos apropriados.

10. Anestésie a pele no local da introdução com anestésico local, conforme for necessário. Nos kits onde é fornecido, utiliza-se um copo de recolha de agulhas SharpsAway para a eliminação destas. Espete as agulhas na espuma após a sua utilização. Elimine o copo depois de terminado o procedimento. **Precaução: Não volte a utilizar as agulhas depois de terem sido colocadas no copo**

de recolha. Poderá haver aderência de partículas à ponta da agulha.

11. Prepare todo o equipamento. Retire o protector da ponta do cateter. Recue o fio de colocação cerca de 2,5 a 3,8 cm do local onde irá aparar o cateter. **Aviso: Não corte o fio de colocação.** Dobre a extremidade proximal do fio de colocação no conector com porta lateral. Tal minimiza o risco do fio de colocação se prolongar para além da ponta distal do cateter durante a introdução.^{14,15} Destaque o protector contra contaminação, expondo a zona do cateter a aparar. Utilizando um aparador, corte o cateter (fazendo um ângulo de 90° com a secção cruzada do cateter) para manter uma ponta romba.

12. Adapte a seringa ao braço lateral e purgue o lúmen distal com uma solução salina estéril. Deixe ficar a seringa em posição. Coloque o cateter sobre o campo estéril.

13. Volte a aplicar um garrote e mude de luvas esterilizadas.

14. Coloque um penso no local para máxima protecção.

15. Utilizando uma bainha desprendível sobre a agulha, execute a venipunção. Uma vez estabelecido o refluir do sangue, avance a agulha juntamente com a bainha desprendível, como uma unidade, até que a bainha se encontre correctamente colocada dentro do vaso.

16. Desaperte o garrote.

17. Segure na bainha de maneira a que fique imóvel e remova a agulha. **Aviso: Para minimizar os riscos de uma possível embolia devida à bainha, não reinsira a agulha na bainha. Verifique a presença de fluxo pulsátil.** A presença de um fluxo pulsátil é geralmente um indicador de punção arterial acidental. **Precaução: A cor do sangue aspirado não é sempre um indicador fiável de acesso venoso.**¹³

18. Agarre o extremo distal da protecção contra contaminações, retire até expor a ponta do cateter e avance o cateter lentamente através da bainha desprendível. A protecção contra contaminações separar-se-á do cateter à medida que ambos avançam simultaneamente.

19. Quando a ponta do cateter alcançar o nível da linha axilar, coloque o doente de forma a diminuir a possibilidade de uma má colocação da ponta do cateter na veia jugular interna.

Adultos: Peça ao doente para voltar a cabeça na direcção do braço cateterizado e baixar o queixo contra o ombro.²⁰

Crianças: Dê instruções ao doente conforme for necessário.

Se ao avançar o cateter encontrar resistência, retroceda um pouco e/ou purgue-o suavemente enquanto avança.

20. Interrompa o avanço do cateter 5 cm antes de alcançar o comprimento da introdução preestabelecida.
21. Retire a bainha desprendível do local da punção venosa.
22. Agarre nas linguetas da bainha desprendível e puxe-as, afastando-as do cateter até a bainha se separar totalmente.
23. Avance o cateter até à sua posição permanente final.
24. Retire o conjunto do braço lateral com Luer-Lock e fio de colocação como uma unidade.
25. Verifique a colocação do cateter com a seringa, aspirando através do lúmen distal até ser observado um fluxo livre de sangue venoso. **Precaução: A cor do sangue aspirado não é sempre um indicador fiável de acesso venoso.**¹³
26. Lave o lúmen com um volume suficiente de solução a fim eliminar completamente o sangue.
27. Ligue a pigtail à linha Luer-Lock adequada, conforme for necessário. Alternadamente, a porta pode ser "trancada" utilizando tampas de injeção segundo o protocolo do hospital/agência. **Aviso: Este produto contém um clampe lateral que pode ser removido acidentalmente e potencialmente aspirado, por crianças ou adultos obnubilados.** Nessas situações, o médico deve remover o clampe quando não estiver a ser utilizado. A ponta pigtail possui clampes deslizantes para ocluir o fluxo através do lúmen durante a mudança de linhas e das tampas de injeção. **Precaução: Para minimizar o risco de danos na pigtail decorrentes de uma pressão excessiva, o clampe deverá ser aberto antes de se proceder à infusão através do lúmen.**

Conector de Injeção sem Agulha UserGard Arrow (quando fornecido) Indicações para a Utilização:

- Adapte a extremidade Luer do conector do UserGard à seringa.
- Desinfecte a tampa da injeção com álcool ou iodopovidona, segundo o protocolo habitual do hospital ou instituição.
- Remova a tampa vermelha protectora do conector.
- Pressione o conector UserGard contra a tampa da injeção e rode para o fixar na posição correcta (consulte a Fig. 3).
- Injecte ou aspire líquido conforme for necessário.
- Solte o conector UserGard da tampa da injeção e elimine-o. **Aviso: Para minimizar os riscos de uma possível embolia gasosa, não deixe o**

conector UserGard ligado à tampa da injeção. Utilizar apenas uma vez.

28. Limpe o local da introdução de acordo com o protocolo do hospital ou da instituição.
29. Fixe o cateter. Quando for fornecido, pode utilizar um dos seguintes dispositivos: um grampo para cateter, um fixador, um Dispositivo de Fixação StatLock ou fitas adesivas Steri-Strips.

Instruções para o Dispositivo de Ancoragem Statlock:

Aplicação Inicial:

- Limpe e desinfecte o local onde prevê colocar o penso de acordo com o protocolo do hospital ou instituição. Deve preparar a pele de modo a maximizar a aderência do StatLock. Deixe secar completamente. O penso do dispositivo de fixação deve ser colocado de maneira a que o centro do mesmo fique a cerca de 2,5 a 3,8 cm do local da introdução do cateter.
- O cateter pode ser fixo ao StatLock utilizando o conector de sutura primário. **Precaução: Minimize a manipulação do cateter durante este procedimento para manter uma posição adequada da ponta do cateter. O cateter deverá ficar posicionado por baixo do penso sem ficar sujeito a tensões.**

Fixação do Conector de Sutura Primário:

Tendo como base medições anteriores, depois de ter colocado o cateter na posição correcta, o conector de sutura primário encontra-se entre 2,5 a 3,8 cm do local da introdução. Coloque as asas do conector de sutura por cima das barras StatLock e carregue (ver Fig. 4). Coloque as abas de retenção do StatLock na posição fechada para fixar o conector de sutura (ver Fig. 5).

- Remova o papel adesivo de uma das metades da compressa de fixação do StatLock e aplique-a, exercendo pressão, sobre a pele seca e preparada. Repita o processo com a outra metade do StatLock.
- Conclua o penso estéril do local de introdução de acordo com o protocolo definido pelo hospital ou instituição.
- Registe a aplicação do StatLock/penso no processo do doente.
- Substitua o StatLock/penso de acordo com o protocolo do hospital ou instituição. O dispositivo de fixação StatLock deve ser substituído pelo menos uma vez em cada 7 dias para assegurar uma máxima aderência.

Técnica alternativa:

Aplicar fitas adesivas Steri-Strips e um penso esterilizado, ou aplicar uma sutura e um penso estéril, de acordo com o protocolo do hospital ou instituição. **Precaução: Não suturar directamente ao diâmetro exterior do cateter para**

minimizar o risco de corte ou dano do cateter, ou de impedir o fluxo no interior do mesmo.

Remoção do dispositivo de fixação StatLock:

- Remova o penso e as suturas, caso seja necessário.
 - Abra as abas de retenção do StatLock e retire o cateter das barras do StatLock (caso seja aplicável).
 - Aplique um cotonete com álcool no adesivo do StatLock e levante suavemente a compressa da pele.
 - Registe o procedimento da remoção no processo do doente.
30. Coloque o rótulo de “Cateter Venoso Central de Introdução Periférica” sobre o penso.
 31. Obtenha imediatamente uma radiografia do tórax para confirmar a posição da ponta. **Precaução: O exame radiográfico deve mostrar o cateter localizado no lado direito do mediastino, na veia cava superior, por cima da união da mesma com a aurícula direita e paralelamente à parede do vaso,^{10,23} de maneira a que a sua ponta distal se encontre a um nível superior à veia ázigos ou à carina da traqueia, dependendo da que se veja melhor.** Caso a ponta do cateter não se encontre correctamente posicionada, reposicione-a e volte a confirmar a sua posição. **Precaução: Se tiver dificuldade em visualizar a ponta do cateter na radiografia, pode injectar uma pequena quantidade de contraste radiopaco para facilitar a localização da ponta.¹⁴**
 32. Preencha a etiqueta adesiva com os dados e cole-a na ficha do doente. Registe as avaliações e o procedimento de introdução.
 33. Verifique regularmente a posição da ponta do cateter utilizando as marcas em centímetros do cateter.

Heparinização

1. Para manter a permeabilidade do cateter poderá ser utilizada uma solução de bloqueio com várias concentrações. A quantidade de heparina usada,

caso o seja, e a frequência da lavagem dependem da preferência do médico, protocolo do hospital/instituição e do estado do doente.^{3,8}

2. O volume da solução de heparina deve ser igual ou ligeiramente superior ao volume do lúmen que vai ser bloqueado. O volume de purga do cateter está impresso na embalagem do produto.

Procedimento de remoção do cateter:

1. Remova o penso e as suturas, caso seja necessário. **Precaução: Para minimizar o risco de corte do cateter, não utilize uma tesoura para retirar o penso.**
2. Abra as abas de retenção do StatLock e retire o cateter das barras do StatLock (caso seja aplicável).
3. Remova o cateter lentamente, puxando-o paralelamente à pele. **Precaução: Para minimizar o risco de fractura do cateter, não aplique força excessiva se tiver dificuldade em retirá-lo.** Se encontrar resistência, aplique calor na zona durante 20 a 30 minutos.^{16,25} Comece a tirar suavemente o cateter paralelamente à pele. Se continuar a notar alguma dificuldade, efectue uma radiografia e consulte o médico.
4. Após a remoção do cateter, deve medi-lo e inspeccioná-lo de forma a garantir que saiu na sua totalidade.
5. Aplique um cotonete com álcool no adesivo do StatLock e levante suavemente a compressa da pele (caso seja aplicável).
6. Cubra o local da introdução.
7. Registe o remoção do cateter e o procedimento de remoção do StatLock (caso seja aplicável) no processo do doente.

A Arrow International, Inc. recomenda que o utilizador esteja a par da literatura de referência.

*Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais específicas, por favor contacte a Arrow International, Inc.

Catéter venoso central, recortable, para inserción periférica con dispositivo de colocación metálico

Consideraciones relativas a la seguridad y la eficacia:

No utilizar si el paquete ha sido previamente abierto o está dañado. **Advertencia: Antes de usar el dispositivo, leer todas las advertencias, precauciones e instrucciones incluidas en el paquete. El no hacerlo puede ocasionar lesiones graves o el fallecimiento del paciente.**

No alterar el catéter ni ningún otro componente del juego o conjunto durante la inserción, el uso o la extracción excepto de la forma indicada.

El procedimiento debe ser realizado por personal especializado con buen conocimiento de los puntos de referencia anatómicos, las técnicas de seguridad y las posibles complicaciones.

Advertencia: No colocar ni dejar que el catéter permanezca en la aurícula o el ventrículo derechos (véase la Figura 1).

Taponamiento cardíaco: Numerosos autores han documentado que la colocación de catéteres permanentes en la aurícula derecha es una práctica peligrosa^{1,2,4,5,7,17,18} que puede provocar perforación y taponamiento cardíacos.^{1,2,4,5,17,18} Aunque el taponamiento cardíaco causado por efusión pericárdica es poco frecuente, existe un elevado índice de mortalidad asociado a él.²¹ Los médicos que coloquen catéteres venosos centrales deben tener presente esta complicación potencialmente mortal antes de hacer avanzar demasiado el catéter en relación con el tamaño del paciente.

No existen trayectos ni tipos de catéteres específicos que permitan eliminar esta complicación potencialmente mortal.¹⁸ Después de la inserción, la posición real de la punta del catéter permanente deberá confirmarse mediante una radiografía.^{1,2,5,16,18,22} Los catéteres venosos centrales deben colocarse en la vena cava superior^{1,2,4,5,7,17,23} por encima de la unión de la misma con la aurícula derecha y paralelos a la pared del vaso,^{10,23} y su punta distal debe situarse a un nivel por encima de la vena álgica o de la carina traqueal, según cuál de las dos se visualice mejor.

Los catéteres venosos centrales no deben colocarse en la aurícula derecha a menos que sea específicamente necesario para la realización de procedimientos especiales de duración relativamente breve como, por ejemplo, la aspiración de émbolos gaseosos durante una intervención neuroquirúrgica. No obstante, dichos procedimientos conllevan riesgos y deberán ser estrechamente supervisados y controlados.

Indicaciones de uso:

Los catéteres venosos centrales para inserción periférica permiten el acceso venoso a la circulación central a través de una vena periférica, y ofrecen un método alternativo de terapia intravenosa para ciertos pacientes, tanto adultos como pediátricos.

Contraindicaciones:

No se conoce ninguna.

Advertencias y precauciones:*

- Advertencia: Estéril, para un solo uso: no reutilizar, reprocesar ni reesterilizar. La reutilización del dispositivo genera un riesgo potencial de lesiones graves e infección potencialmente mortal.**
- Advertencia: No colocar ni dejar que el catéter permanezca en la aurícula o el ventrículo derechos. Los catéteres venosos centrales deben colocarse de manera que su punta distal se encuentre en la vena cava superior por encima de la unión de ésta con la aurícula derecha y quede paralela a la pared del vaso.**
- Advertencia: Los médicos deben estar familiarizados con las complicaciones relacionadas con los catéteres venosos centrales, que incluyen el taponamiento cardíaco causado por la perforación auricular, ventricular o de la pared del vaso, lesiones pleurales y mediastínicas, embolia gaseosa, embolia a causa del catéter, laceración del conducto torácico, bacteriemia, septicemia, trombosis, punción inadvertida de la arteria, daños en nervios, formación de hematomas, hemorragia y disritmias.**
- Advertencia: No forzar demasiado el catéter al colocarlo o retirarlo. Si la colocación o la extracción no pueden lograrse con facilidad, debe efectuarse una radiografía del tórax y concertarse una consulta posterior.**
- Advertencia: El médico debe tener presente la posibilidad de que surjan problemas de embolia gaseosa relacionados con agujas o catéteres que puedan dejarse abiertos en los sitios en los que se hayan practicado punciones venosas, o provocados por desconexiones inadvertidas. A fin de reducir el riesgo de una embolia gaseosa, con este dispositivo deben utilizarse únicamente conexiones del tipo Luer-Lock firmemente apretadas. A fin de prevenir embolias gaseosas, en todo lo relacionado con el mantenimiento de catéteres debe seguirse el protocolo del hospital o la institución.**

6. **Advertencia:** El médico debe estar familiarizado con las condiciones clínicas que pueden limitar el uso de los catéteres centrales para inserción periférica, tales como: dermatitis, celulitis y quemaduras en el sitio de inserción o cerca de él, trombosis venosa ipsolateral anterior, radioterapia, contracturas, mastectomía y posible uso para fistula auriculoventricular.
 7. **Advertencia:** Para reducir al mínimo el riesgo de dañar el catéter si el dispositivo de colocación metálico se retira antes de la inserción del catéter, no se debe intentar volver a introducir el dispositivo de colocación metálico.
 8. **Advertencia:** Debido al riesgo de exposición al VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) o a otros agentes patógenos transmitidos por la sangre, durante el cuidado de los pacientes el personal médico debe observar siempre las normas universales de precaución relacionadas con la sangre y los fluidos corporales.
 9. **Precaución:** Los catéteres permanentes deben inspeccionarse de forma sistemática para verificar la velocidad de flujo deseada, la firmeza del vendaje, la posición correcta del catéter y la firme sujeción de las conexiones tipo Luer-Lock. Utilizar las marcas de centímetros para comprobar si ha habido cambios en la posición del catéter.
 10. **Precaución:** Un examen radiográfico de la colocación del catéter es la única forma de asegurarse de que la punta del mismo no ha penetrado en el corazón o de que el catéter sigue colocado paralelo a la pared del vaso. Si la posición del catéter ha cambiado, realizar inmediatamente un examen radiográfico para confirmar la posición de la punta del catéter.
 11. **Precaución:** El alcohol y la acetona pueden debilitar la estructura del material de poliuretano. Comprobar el contenido de acetona y alcohol de los ingredientes de los preparados empleados en pulverizadores y torundas.
Acetona: No usar acetona sobre la superficie de los catéteres. La acetona puede aplicarse a la piel, pero debe dejarse que se seque completamente antes de aplicar vendajes.
Alcohol: No usar alcohol para poner en remojo la superficie de los catéteres ni para desatascar catéteres. Debe prestarse sumo cuidado al instilar medicamentos que contengan altas concentraciones de alcohol. Dejar siempre que el alcohol se seque completamente antes de aplicar vendajes.
Estos agentes también pueden debilitar la unión adhesiva entre el dispositivo de anclaje StatLock y la piel.
 12. **Precaución:** Algunos de los desinfectantes empleados en el sitio de inserción del catéter contienen disolventes que pueden dañar el material del catéter. Asegurarse de que el sitio de inserción esté seco antes del vendaje.
 13. **Precaución:** Las indicaciones para el uso de este dispositivo en niños son iguales a las de los adultos; sin embargo, las técnicas de inserción con frecuencia se modifican de acuerdo con la edad y el tamaño del cuerpo del niño. Si el médico no tiene experiencia con el uso de este producto en niños, debe solicitar una consulta adecuada.
 14. **Precaución:** Cuando el catéter se encuentre con su extremo distal situado en un vaso proximal a la vena cava superior (línea medioclavicular o línea mediana), los médicos deben tener presente el riesgo de tromboflebitis inducida químicamente.¹¹ Al administrar una solución de glucosa superior al 10% o nutrición parenteral total, medicamentos con una osmolaridad superior a los 600 mOsm/litro, medicamentos con osmolaridad entre 400 y 600 mOsm/litro durante más de 4 semanas, o medicamentos que producen irritación en los vasos proximales a la vena cava, la punta del catéter debe estar situada en la circulación central.¹⁹
 15. **Precaución:** Para reducir al mínimo el riesgo de que el catéter resulte dañado por la presión, no exponer el mismo a una presión superior a las 50 libras por pulgada (3,5 kilogramos por centímetro cuadrado aproximadamente). Entre las causas comunes de exceso de presión se incluyen las siguientes: jeringas de capacidad inferior a los 10 cc utilizadas para irrigar o desobstruir un catéter ocluido (una jeringa de 1 cc llena de líquido puede superar las 300 libras por pulgada cuadrada, o sea, 21 kilogramos por centímetro cuadrado aproximadamente), ciertos procedimientos radiográficos y bombas de infusión con límites de presión por oclusión superiores a las 50 libras por pulgada (3,5 kilogramos por centímetro cuadrado aproximadamente).
 16. **Precaución:** El dispositivo de anclaje StatLock debe inspeccionarse regularmente para verificar su grado de adherencia a la piel y su conexión con el catéter; al mismo tiempo, también debe verificarse la posición del catéter utilizando las marcas en centímetros del cuerpo del catéter.
- Procedimiento sugerido:**
Utilizar una técnica estéril.
1. Verificar la orden del médico, que debe incluir una radiografía del tórax después de la colocación del catéter.
 2. Explicar el procedimiento al paciente y solicitar que firme la autorización correspondiente.

3. Medir y registrar la circunferencia de la parte superior del brazo.
 4. Mediante el uso del torniquete correspondiente, identificar la vena apropiada para la inserción.
Adultos: Los catéteres centrales para inserción periférica generalmente se introducen en la vena basilíca, en la cubital mediana o en la cefálica (véase la Figura 2).
Pacientes pediátricos: Los catéteres centrales para inserción periférica generalmente se introducen en la vena basilíca, en la cefálica, en la del cuero cabelludo o en la safena.⁹ La vena más adecuada depende del tamaño del cuerpo y de la edad del niño.
 5. Soltar el torniquete y dejarlo en posición debajo del brazo.
 6. Medir al paciente para determinar la longitud del catéter requerida para colocar la punta distal en la vena cava superior.
Adultos: Extender el brazo de forma que quede formando un ángulo de entre 45 y 90 grados con el tronco. Medir la distancia desde el sitio de inserción a lo largo del trayecto anatómico previsto del vaso que se desee cateterizar. La punta del catéter debe quedar en el tercio distal de la vena cava superior por encima de la aurícula derecha y paralela a la pared de dicha vena cava superior. Si se va a utilizar el dispositivo de anclaje StatLock, añadir de 2,5 a 3,8 cm a la longitud del catéter.
Pacientes pediátricos: Medir la distancia desde el sitio de inserción a lo largo del trayecto anatómico previsto del vaso que se desee cateterizar. La punta del catéter debe quedar en el tercio distal de la vena cava superior arriba por encima de la aurícula derecha y paralela a la pared de la vena cava superior. Cuando el sitio de inserción sea la vena safena, la punta del catéter debe quedar en el tercio distal de la vena cava inferior por debajo de la aurícula derecha y paralela a la pared de la vena cava inferior. Si se utiliza el dispositivo de anclaje StatLock, añadir de 2,5 a 3,8 cm a la medida del catéter.
 7. Colocar al paciente en posición para la inserción.
Adultos: Colocar al paciente de la forma adecuada para el sitio de inserción. Extender el brazo lateralmente de forma que quede formando un ángulo de entre 45 y 90 grados con el tronco.
Pacientes pediátricos: Colocar al paciente de la forma adecuada para el sitio de inserción.
 8. Llevar a cabo el lavado quirúrgico previo a las operaciones quirúrgicas. Utilizar indumentaria de protección (máscara, gafas protectoras, bata y guantes estériles, gorro).
 9. Preparar el sitio de la punción venosa utilizando los antisépticos apropiados.
 10. Efectuar una incisión cutánea inyectando anestésico local, según se necesite. En los juegos donde se suministre, se puede utilizar un clavavujas desechable SharpsAway para la eliminación de las agujas. Después de su uso, clavar las agujas en la esponja y desechar todo al terminar el procedimiento. **Precaución: No volver a utilizar las agujas que se hayan colocado en el clavavujas desechable, ya que la punta de las mismas pueden haberse contaminado con partículas que hayan quedado adheridas.**
11. Preparar todo el equipo. Quitar el protector de la punta del catéter. Retraer el dispositivo de colocación metálico entre 2,5 y 3,8 cm del lugar en el que se va a cortar el catéter. **Advertencia: No cortar el dispositivo de colocación metálico.** Enroscar el extremo proximal del dispositivo de colocación metálico del conector con el orificio lateral. Esto reduce al mínimo el riesgo de que el dispositivo de colocación metálico se extienda más allá de la punta distal del catéter durante la introducción.^{14,15} Desprender el protector anticontaminación para dejar al descubierto la parte del catéter que se desee recortar. Mediante el dispositivo de recorte, cortar el catéter en ángulo recto transversal (90° respecto de la sección transversal del catéter) para mantener una punta roma.
 12. Acoplar la jeringa al brazo lateral y purgar la luz distal con solución fisiológica estéril. Dejar la jeringa en posición. Colocar el catéter sobre un campo estéril.
 13. Volver a aplicar el torniquete y ponerse nuevamente guantes estériles.
 14. Cubrir el sitio para obtener la máxima protección.
 15. Utilizando una vaina desprendible sobre la aguja, proceder a la punción venosa. Una vez establecido el flujo, hacer avanzar la aguja junto con la vaina desprendible como si fuese una sola unidad, hasta que la vaina se encuentre colocada correctamente dentro del vaso.
 16. Soltar el torniquete.
 17. Sujetar la vaina de manera que no se mueva y retirar la aguja. **Advertencia: A fin de minimizar el riesgo de una posible embolia a causa de la vaina, no volver a insertar la aguja en esta última.** Comprobar la presencia de flujo pulsátil, que indica la punción involuntaria de una arteria. **Precaución: El color de la sangre aspirada no es siempre una indicación fiable de acceso venoso.**¹³
 18. Sujetar el extremo distal del protector anticontaminación, tirar hacia atrás para dejar al descubierto la punta del catéter y hacer avanzar este último lentamente a través de la vaina desprendible. El protector anticontaminación se desprenderá del catéter a medida que ambos avanzan simultáneamente.
 19. Cuando la punta del catéter alcance el nivel de la línea axilar, colocar el paciente de manera que se disminuya la posibilidad de una mala colocación de la punta del catéter en la vena yugular interna.

Adultos: Pedir al paciente que vuelva la cabeza hacia el brazo cateterizado y apoye el mentón en el hombro.²⁰

Pacientes pediátricos: Dar las instrucciones apropiadas al paciente.

Si al avanzar el catéter se encuentra resistencia, retraerlo o purgarlo suavemente mientras se avanza.

20. Interrumpir el avance del catéter 5 cm antes de alcanzar la longitud de inserción preestablecida.
21. Extraer la vaina desprendible del sitio de la punción venosa.
22. Sujetar las lengüetas de la vaina desprendible y tirar de ellas separándolas del catéter hasta que la vaina se desprenda totalmente.
23. Continuar avanzando el catéter hasta que llegue a la posición permanente final.
24. Retirar conjuntamente el acoplamiento de brazo lateral de tipo Luer-Lock y el dispositivo de colocación metálico.
25. Verificar la colocación del catéter con la jeringa aspirando a través de la luz distal hasta observar un flujo libre de sangre venosa. **Precaución: El color de la sangre aspirada no es siempre una indicación fiable de acceso venoso.**¹³
26. Purgar la luz con un volumen suficiente de solución de purga para eliminar completamente la sangre aspirada.
27. Conectar la punta pigtail a la línea con cierre tipo Luer-Lock correspondiente, según se requiera. Como alternativa, el conector puede purgarse con solución de cierre a través del capuchón de inyección de acuerdo con el protocolo estándar del hospital o de la institución. **Advertencia: Este dispositivo contiene pinzas deslizantes que podrían desprenderse involuntariamente y ser ingeridas por niños o adultos en estado de confusión mental.** En tales circunstancias, los médicos deben quitar dichas pinzas cuando no se utilicen. Las puntas pigtail tienen pinzas deslizantes para impedir el flujo a través de las luces durante el cambio de líneas y de capuchones de inyección. **Precaución: A fin de reducir al mínimo el riesgo de dañar las puntas pigtail a causa de una presión excesiva, es necesario abrir la pinza antes de la infusión de líquidos a través de la luz.**

Conector de inyección sin aguja UserGard de Arrow (cuando se suministre)

Instrucciones de uso:

- Conectar el extremo tipo Luer-Lock del conector UserGard a la jeringa.
- Preparar el capuchón de inyección con alcohol o tintura de yodo de acuerdo con el protocolo del hospital o la institución.
- Retirar el capuchón rojo de protección contra el polvo del conector.

- Encajar el conector UserGard encima del capuchón de inyección y girar para fijarlo sobre la espiga (véase la Figura 3).

- Inyectar o aspirar líquido según corresponda.

- Desconectar el conector UserGard del capuchón de inyección y desecharlo. **Advertencia: Para reducir al mínimo el riesgo de embolia gaseosa, el conector UserGard no debe dejarse conectado al capuchón de inyección. Este dispositivo es para un solo uso.**

28. Limpiar el sitio de la inserción de acuerdo con el protocolo del hospital o la institución.

29. Sujetar el catéter. Cuando se suministre, puede utilizarse uno de los siguientes artículos: una pinza o un sujetador para catéter, un dispositivo de anclaje StatLock o tiras adhesivas Steri-Strips.

Instrucciones para el uso del dispositivo de anclaje StatLock:

Aplicación inicial:

- Limpiar y preparar el sitio previsto para el vendaje de acuerdo con el protocolo del hospital o la institución. La piel debe untarse con un producto preparador que potencie al máximo la adherencia del StatLock. Dejar que se seque completamente. La almohadilla del ancla se coloca de manera que su centro quede a entre 2,5 y 3,8 cm del sitio de inserción del catéter.

- El catéter puede fijarse al StatLock mediante el conector de sutura primario. **Precaución: Durante este procedimiento se debe limitar al máximo la manipulación del catéter a fin de mantener la punta del mismo en la posición correcta. Colocar el catéter debajo del vendaje de forma que no quede tirante.**

Fijación del conector de sutura primario:

Según las mediciones anteriores, después de haber colocado el catéter en la posición correcta, el conector de sutura primario se encuentra a entre 2,5 y 3,8 cm del sitio de inserción. Colocar las aletas del conector de sutura sobre las patillas del StatLock y empujar hacia abajo (véase la Figura 4). Fijar (se oirá un chasquido) las aletas de retención del StatLock de forma que queden en la posición de cierre para sujetar el conector de sutura (véase la Figura 5).

- Desprender el papel adhesivo de una de las mitades de la almohadilla de anclaje del StatLock y aplicarla con presión sobre la piel seca y preparada. Repetir el proceso con la otra mitad del StatLock.

- Completar el vendaje estéril del sitio de inserción de acuerdo con el protocolo del hospital o la institución.

- Documentar la aplicación del StatLock y del vendaje en la ficha del paciente.

- Cambiar el StatLock y el vendaje en conformidad con el protocolo del hospital o de la institución. El dispositivo de anclaje StatLock debe

cambiarse por lo menos cada 7 días para asegurar la máxima adherencia.

Técnica alternativa:

Aplicar tiras adhesivas Steri-Strips y vendaje estéril o aplicar sutura y vendaje estéril de acuerdo con el protocolo del hospital o de la institución.

Precaución: A fin de minimizar el riesgo de cortar o dañar el catéter, o impedir el flujo a través del mismo, no suturar directamente al diámetro exterior del catéter.

Procedimiento de retirada del dispositivo de anclaje StatLock:

- Retirar el vendaje y los puntos de sutura, si procede.
 - Abrir las aletas de retención del StatLock y retirar el catéter de las patillas del StatLock (si procede).
 - Aplicar una torunda de alcohol al adhesivo del StatLock y separar suavemente la almohadilla de la piel.
 - Documentar el procedimiento de retirada del StatLock en la ficha del paciente.
30. Colocar en el vendaje la etiqueta del catéter de vena central con inserción periférica.
 31. Hacer inmediatamente una radiografía del tórax para verificar la posición de la punta. **Precaución: El examen radiográfico debe mostrar el catéter situado en el lado derecho del mediastino de la vena cava superior, encima de la unión de la vena misma con la aurícula derecha y paralelo a la pared del vaso,^{10,23} debiendo la punta distal encontrarse a un nivel por encima de la vena ácigos o de la carina de la tráquea, según la que se visualice mejor.** Si la punta del catéter se encuentra mal colocada, volverla a colocar y verificar de nuevo su posición. **Precaución: Si se encuentra dificultad para visualizar la punta del catéter con la radiografía, puede inyectarse una pequeña cantidad de tinte radiopaco para facilitar la ubicación de la punta.¹⁴**
 32. Rellenar la etiqueta adhesiva con los datos y adherir a la ficha del paciente. Registrar las evaluaciones y el procedimiento de inserción.
 33. Verificar regularmente la posición de la punta del catéter utilizando las marcas en centímetros impresas en el catéter.

Heparinización:

1. Para mantener el catéter libre de obstrucciones puede utilizarse una solución de “bloqueo” en varias concentraciones. En caso de que se emplee heparina, la cantidad de ésta y la frecuencia de las purgas dependen de la preferencia del médico, del protocolo del hospital o la institución y del estado del paciente.^{3,8}
2. El volumen de solución de heparina debe ser igual o ligeramente superior al volumen de la luz que se desea “bloquear”. El volumen de cebado del catéter está impreso en el envase del producto.

Procedimiento para la extracción del catéter:

1. Retirar el vendaje y los puntos de sutura, si procede. **Precaución: A fin de minimizar el riesgo de cortar el catéter, no emplear tijeras para retirar el vendaje.**
2. Abrir las aletas de retención del StatLock y retirar el catéter de las patillas del StatLock (si procede).
3. Retirar el catéter tirando de él lentamente y en posición paralela a la piel. **Precaución: Para reducir al mínimo el riesgo de romper el catéter, no forzarlo demasiado si la extracción presenta dificultades.** Si se encuentra resistencia, aplicar calor en la zona durante entre 20 y 30 minutos.^{16,25} Comenzar a tirar suavemente del catéter en posición paralela a la piel. Si la extracción sigue presentado dificultades, hacer una radiografía y consultar al médico.
4. Una vez extraído el catéter, medirlo e inspeccionarlo para asegurarse de que se haya retirado por completo.
5. Aplicar una torunda de alcohol al adhesivo del StatLock y separar suavemente la almohadilla de la piel (si procede).
6. Vendar el sitio de inserción.
7. Documentar la extracción del catéter y del StatLock (si procede) en la ficha del paciente.

Arrow International, Inc. recomienda que el usuario se familiarice con el material bibliográfico.

*En caso de tener alguna pregunta o si desea obtener información bibliográfica adicional, póngase en contacto con Arrow International, Inc.

Perifert införd kapningsbar central venkateterprodukt med placeringsledare

Säkerhet och verkan:

Använd ej om förpackningen har öppnats vid ett tidigare tillfälle eller om den är skadad. **Varning: Läs före användning varningar, viktiga påpekanden och anvisningar i bipacksedeln. Underlåtenhet att läsa dessa kan eventuellt resultera i allvarlig patientskada eller dödsfall.**

Modifiera aldrig katetern eller någon annan sats/setkomponent under införing, användning eller avlägsnande, förutom när det föreligger instruktioner om detta.

Förfarandet måste utföras av utbildad personal, väl bevandrad i anatomiska riktpunkter, säker teknik och eventuella komplikationer.

Varning: Placera aldrig katetern i eller låt den aldrig sitta kvar i höger förmak eller höger kammare (se Fig. 1).

Hjärttamponad: Många författare har dokumenterat att placering av kvarkatetrar i höger förmak är ett mycket riskfyllt förfarande^{1,2,4,5,7,17,18} som kan leda till perforation och tamponad av hjärtat.^{1,2,4,5,17,19} Även om hjärttamponad sekundärt till hjärtsäcksutjutting är ovanlig, finns det en hög mortalitet associerad med denna komplikation.²¹ Läkare som placerar centrala venkatetrar måste vara medvetna om denna potentiellt livshotande komplikation innan katetern matas in alltför långt med hänsyn till patientens kroppsstorlek.

Ingen speciell införingsväg eller katertyp är undantagen från denna potentiellt livshotande komplikation.¹⁸ Kvarkateterspetsens verkliga position bör bekräftas medelst röntgenundersökning efter införandet.^{1,2,5,16,18,22} Centrala venkatetrar bör placeras i vena cava superior^{1,2,4,5,7,17,23} alldeles ovanför övergången till höger förmak och parallellt med kärlväggen^{10,23} så att deras distala spets ligger precis ovanför den vena azygos eller carina trachealis, beroende på vilken som syns bäst.

Centrala venkatetrar får ej placeras i höger förmak såvida detta ej krävs för speciella, kortvariga förfaranden, t. ex. aspiration av luftemboli under neurokirurgi. Dessa förfaranden är dock riskfyllda och måste noga övervakas och kontrolleras.

Indikationer:

En perifert inlagd central venkateter möjliggör tillträde till det centrala kärlsystemet via en perifer ven. Därmed erbjuds en alternativ metod för intravenös behandling av utvalda vuxen- och barnpatienter.

Kontraindikationer:

Inga kända.

Varningar och Viktigt:*

- Varning: Steril, avsedd för engångsbruk:** Får inte återanvändas, ombearbetas eller omsteriliseras. Återanvändning av produkten medför en potentiell risk för allvarlig skada och/eller infektion som kan leda till dödsfall.
- Placera aldrig katetern i och låt den aldrig sitta kvar i höger förmak eller höger kammare.** Centrala venkatetrar bör placeras så att kateterns distala spets befinner sig i vena cava superior (VCS) alldeles ovanför övergången mellan VCS och höger förmak och parallellt med kärlväggen.
- Läkare måste vara medvetna om komplikationer i samband med centrala venkatetrar inklusive hjärttamponad sekundärt till kärlväggs-, förmaks- eller ventrikelperforation, pleurala och mediastinala skador, luftembolism, kateterembolism, laceration av ductus thoracicus, bakteriemi, septicemi, trombos, oavsiktlig artärpunktur, nervskada, hematom, blödning och rytmrubbningar.**
- Varning: Använd ej onödig kraft vid inplacering eller utdragning av katetern. Om inplacering eller utdragning inte kan utföras på ett lätt sätt, måste bröst-röntgen göras och vidare konsultation begäras.**
- Varning: Läkare måste vara medvetna om risken för luftembolism i samband med att öppna nålar eller katetrar lämnas kvar i centrala vempunkter eller som en konsekvens av oavsiktlig isärkoppling. För att minska risken för luftembolism får endast ordentligt åtdragna Luer-läsanslutningar användas med anordningen. Följ sjukhusets/institutionens rutiner för skydd mot luftembolism vid allt kateterunderhåll.**
- Varning: Läkaren bör beakta kliniska betingelser som kan begränsa användningen av perifert införda katetrar, t ex dermatit, cellulit och brännsår vid eller kring införingsstället, tidigare ipsilateral ventrombi, strålbehandling, kontrakturer, mastektomi och potentiell användning som AV-fistel.**
- Varning: För att hålla nere risken för att katetern skadas då placeringsledaren avlägsnas innan katetern förs in, skall man aldrig försöka att återinföra placeringsledaren.**
- Varning: På grund av risken för HIV (humant immunosuppressivt virus) eller andra blodburna patogena organismer bör sjukvårdspersonal rutinmässigt vidta**

nödvändiga försiktighetsåtgärder vid kontakt med blod och andra kroppsvätskor vid vård av alla typer av patienter.

9. Viktigt: Kvarkatetrar måste inspekteras rutinmässigt för önskad flödeshastighet, förbandets säkerhet, korrekt placering av katetern och korrekt Luer-låsanslutning. Använd centimetermarkeringarna för att se om kateterns läge har förändrats.
10. Viktigt: Endast med röntgenundersökning av kateterns placering kan man bekräfta att kateterns spets inte har trängt in i hjärtat eller inte längre ligger parallellt med kärnväggen. Om kateterns läge har ändrats, utför bröstströmtgen omedelbart för att bekräfta kateterspetsens läge.
11. Viktigt: Alkohol och aceton kan försvaga strukturer hos polyuretanmaterial. Kontrollera aceton- och alkoholinnehållet i preparations-sprayer och -torkar.
Aceton: Använd inte aceton på kateterns yta. Aceton kan appliceras på huden men måste få torka helt innan förband läggs på.
Alkohol: Använd inte alkohol för att blötlägga kateterns yta eller för att rensa lumen. Iakttä försiktighet vid instillation av läkemedel som innehåller alkohol i hög koncentration. Låt alltid alkoholen torka fullständigt innan förband läggs på.
Dessa substanser kan också försvaga vidhäftning av StatLock-förankringsanordningen till huden.
12. Viktigt: Vissa desinficeringsmedel som används vid kateterns införingsställe innehåller lösningsmedel som kan angripa katetermaterial. Se till att införingsstället är torrt innan förband läggs på.
13. Viktigt: Användningsindikationer för barn är de samma som för vuxna men införingstekniken anpassas ofta med hänsyn till barnets ålder och storlek. Om läkaren inte har erfarenhet av användning av denna produkt hos barn bör vederbörlig expertis konsulteras.
14. Viktigt: Vid placering av katetern med den distala änden belägen i ett käril proximalt om VCS (mellersta klavikular- eller medellinjen) måste läkare vara medvetna om risken för kemiskt inducerad tromboflebit.¹¹ Vid infusion av > 10% glukoslösning, lösningar för total parenteral nutrition, läkemedel med en osmolalitet som överstiger 600 mOsm/liter, läkemedel med en osmolalitet mellan 400 och 600 mOsm/liter under längre tid än 4 veckor, eller läkemedel som är kända för att irritera kärilen proximalt om vena cava, måste kateterspetsen ligga i den centrala cirkulationen.¹⁹

15. Viktigt: Minska risken för att tryck förorsakar skada på katetern genom att inte utsätta den för tryck över 350 kPa (50psi). Høgt tryck kan skapas av sådana vanliga procedurer som användning av sprutor med mindre volymer än 10 ml för irrigation eller bortspolning av koagel i en ockluderad kateter (en vätskefylld 1 ml spruta kan generera mer än 2000 kPa/300 psi⁶), vissa radiografiprocedurer och infusionspumpar med en ocklusionstryckbegränsning högre än 350 kPa (50 psi).
16. Viktigt: StatLock-förankringsanordningen bör rutinmässigt inspekteras med avseende på vidhäftning till huden och anslutning till katetern. Samtidigt bör kateterns position kontrolleras med hjälp av centimetermarkeringarna på kateterkroppen.

Förslag till arbetsgång:

Använd steril teknik.

1. Kontrollera läkarordinationen. I läkarordinationen måste ingå bröstströmtgen efter inplaceringen.
2. Förklara proceduren för patienten. Be denne underteckna formuläret för informerat patientmedgivande, om sådant erfordras.
3. Mät och anteckna överarmens omkrets.
4. Identifiera en lämplig ven för insättning, vid behov med en stasbinda.
Vuxna: PIC-katetrar insätts typiskt i vena basilica, cubitalis mediana eller cephalica (se Fig. 2).
Barn: PIC-katetrar insätts typiskt i vena basilica, cephalica, saphena eller vena uppe på hjässan.⁹ Den mest lämpliga venen är beroende av barnets storlek och mognad.
5. Släpp stasbindan men lämna den på plats under armen.
6. Mät patienten för att bestämma vilken kateterlängd som erfordras för att placera den distala spetsen i VCS.
Vuxna: Sträck ut armen cirka 45 till 90 grader från bälten. Mät avståndet från införingsstället längs det tilltänkta katetriseringskärlets antagna anatomiska lopp. Kateterspetsen bör ligga i den distala tredjedelen av VCS, ovanför höger förmak och parallellt med venväggen. Om en StatLock-förankringsanordning kommer att användas läggs 2,5 till 3,8 cm till katetermättet.
Barn: Mät avståndet från införingsstället längs det tilltänkta katetriseringskärlets antagna anatomiska lopp. Kateterspetsen bör ligga i den distala tredjedelen av VCS, ovanför höger förmak och parallellt med venväggen. Om införingsstället ligger i vena saphena bör kateterspetsen ligga i den distala tredjedelen av vena cava inferior (VCI), under höger förmak och parallellt med venväggen. Om en StatLock-förankringsanordning kommer att användas läggs 2,5 till 3,8 cm till katetermättet.
7. Placera patienten för införing.
Vuxna: Placera patienten i lämplig kroppställning

för införingsstället. Sträck ut armen cirka 45 till 90 grader lateralt från bälen.

Barn: Placera patienten i lämplig kroppställning för införingsstället.

8. Utför steriltvätt. Ta på skyddsklädsel (mask, glasögon, sterilkläder, -handskar och huvudbonad).
9. Preparera venpunkturstället med lämpliga antiseptika.
10. Strimma huden med lokalbedövningsmedel efter behov. En SharpsAway-avfallsbägare ingår i somliga satser för kassering av nålar. Tryck in nålen i skuminsatsen efter användning. Slang hela bägaren efter att proceduren är klar. **Viktigt: Nålar får inte återanvändas efter att de placerats i avfallsbägaren. Partikelmaterial kan ha fastnat på nålens spets.**
11. Förbered all utrustning. Avlägsna kateterns spetskydd. Dra tillbaka placeringsledaren ca. 2,5 till 3,8 cm från det ställe där katetern skall kapas. **Varning: Kapa inte placeringsledaren.** Gör en ögla på placeringsledarens proximala ände vid kopplingen med sidoporten. Detta håller risken nere för att placeringsledaren sträcker sig bortom kateterns distala spets under införing.^{14,15} Skala av kontaminationskyddet så att den kateterdel som skall kapas av exponeras. Använd kapningsverktyget och kapa av katetern med ett rakt snitt (90° mot kateterns tvärsnitt) så att spetsen förblir trubbig.
12. Fäst sprutan vid sidoarmen och spola distallumen med steril saltlösning. Lämna kvar sprutan. Placera katetern på steriltäcket.
13. Applicera åter stasbindan och byt sterilhandskar.
14. Klä operationsstället för bästa barriärskydd.
15. Använd en avskalbar skyddshylsa över nålen och utför en venpunktion. När tillbakablödnig har påträffats skjuts nålen och den avskalbara skyddshylsan in i som en enhet tills hylsan ligger ordentligt inne i kärlet.
16. Släpp stasbindan.
17. Håll skyddshylsan stadigt på plats och dra ut nålen. **Varning: För att minska risken för eventuell embolisering av skyddshylsan får nålen inte sättas in på nytt i hylsan.** Kontrollera om flödet pulserar som ett tecken på att en artär av misstag blivit punkterad. **Viktigt: Färgen på blodet är ej alltid ett säkert tecken på ventilträde.¹³**
18. Grip den distala änden på kontaminationskyddet, dra det bakåt för att blotta kateterspetsen och skjut långsamt fram katetern genom den avskalbara skyddshylsan. Kontaminationskyddet skalas av från katetern när de skjuts in tillsammans.
19. När kateterspetsen när axillärinjens nivå ändras patientens ställning för att minska risken för att kateterspetsen blir felplacerad i vena jugularis interna.

Vuxna: Be patienten vrida huvudet mot den kateteriserade armen och sänka ner hakan mot skuldran²⁰

Barn: Ge patienten anvisningar om möjligt.

Om motstånd påträffas under inskjutningen av katetern, dra den något tillbaka och/eller spola försiktigt under inskjutningen.

20. Stoppa inskjutningen 5 cm innan den förutbestämda insättningslängden uppnås.
21. Dra ut den avskalbara hylsan tills den är utanför venpunkturstället.
22. Grip tag i flikarna på den avskalbara hylsan och dra dem isär bort från katetern tills hylsan spjälkts i hela sin längd.
23. Skjut fram katetern till dess slutliga kvarliggande läge.
24. Avlägsna Luer-låsmonteringen på sidoarmen och placeringsledaren tillsammans.
25. Kontrollera kateterns placering med sprutan genom att aspirera genom distallumen tills fritt flöde av venblod kan observeras. **Viktigt: Blodets färg är inte alltid ett säkert tecken på ventilträde.¹³**
26. Spola lumen med tillräcklig mängd lösning för att helt rensa ut blod från lumen.
27. Koppla svansen till lämplig Luer-låsslång allt efter behov. Alternativt kan portar ”läslösningsfyllas” genom injektionsporten enligt sjukhusets normala procedur. **Varning: Denna produkt innehåller en skjutklämma som kan avlägsnas av misstag och eventuellt aspireras av barn eller förvirrade vuxna patienter.** Om sådana situationer uppstår bör läkaren avlägsna klämman när den inte används. Skjutklämmor finns placerade på katetersvansar för att kunna blockera flödet genom varje lumen vid byte av slang eller injektionsport. **Viktigt: För att hålla nere risken för att katetersvansen skadas av onödigt hårt tryck bör klämman öppnas före infusion genom lumen.**

Arrow UserGard nålfri injektionsfattning (om sådan ingår)

Bruksanvisning:

- Koppla Luer-änden på UserGard-fattningen till sprutan.
- Torka av injektionslocket med alkohol eller jodtinktur (polyvinylpyrrolidonjod) enligt sjukhusets/institutionens normala rutin.
- Ta loss den röda skyddshatten från fattningen.
- Tryck UserGard-fattningen på injektionslocket och vrid så den läses på pinnen. (se Fig. 3).
- Injicera eller aspirera vätska efter behov.
- Ta loss UserGard-fattningen från injektionslocket och kassera den. **Varning: För att minska risken för luftembolism får UserGard-**

fattningen inte lämnas ansluten till injektionslocket. Endast för engångsbruk.

28. Rengör införingsstället enligt sjukhusets/institutionens rutin.
29. Fäst katetern. En kateterklämma, fäste, StatLock-förankringsanordning eller Steri-Strips kan användas, om sådana medföljer.

Anvisningar för Statlock förankringskudde:

Första applicering:

- Rengör och iordningställ planerat förbandsställe enligt sjukhusets/institutionens rutin. Applicera hudprepareringsmedel som hudbeläggning för bästa vidhäftning av StatLock. Låt torka ordentligt. Förankringskudden kommer att placeras så att dess mittpunkt ligger inom 2,5 till 3,8 cm från kateterns införingsställe.
- Katetern kan fästas vid StatLock med hjälp av den primära suturfattningen. **Viktigt: Undvik i möjligaste mån att manipulera katetern under hela denna procedur, så att kateterspetsen stannar kvar i korrekt läge. Se till att katetern ligger belastningsskyddad under förbandet.**

Fastsättning av den primära suturfattningen:

Efter att katetern är korrekt inplacerad borde enligt de tidigare mätningarna den primära suturfattningen ligga inom 2,5 till 3,8 cm från införingsstället. Placera suturvingarna över tapparna på StatLock och tryck ner dem (se Fig. 4) Knappt fast hållarvingarna på StatLock till stängt läge för att fästa suturfattningen (se Fig. 5).

- Avlägsna skyddspappret från den ena halvan av StatLock s förankringskudde och tryck ner den på den torra preparerade huden. Upprepa proceduren för den andra halvan av StatLock.
- Täck införingsstället med sterilförband enligt sjukhusets etablerade rutin.
- Journalför applikation av StatLock/förband.
- Byt ut StatLock/förband enligt sjukhusets/institutionens rutin. Statlock-förankringskudden bör bytas ut minst var sjunde dag för att säkerställa maximal vidhäftning.

Alternativ teknik:

Applicera Steri-Strips och sterilförband eller applicera sutur och sterilförband enligt sjukhusets/institutionens rutin. **Viktigt: Suturen ej direkt på kateterns yttre omkrets för att minska risken för att klippa av eller skada katetern eller att hämma flödet.**

Borttagning av Statlock-förankringskudden:

- Avlägsna förband och suturer (i förekommande fall).

- Öppna StatLocks hållarvingar och ta loss katetern från StatLocks tappar (i förekommande fall).
- Applicera en alkoholtork på StatLocks häftmedel och lyft varsamt bort kudden från huden.
- Journalför borttagningen av StatLock i patientjournalen.

30. Applicera PICC-etiketten på förbandet.

31. Kontrollera genast spetsens placering med bröst-röntgen. **Viktigt: Röntgenundersökningen måste visa att katetern är placerad på höger sida av mediastinum i VCS ovanför övergången till höger förmak och parallellt med kärlväggen.^{10,23} så att kateterns distala spets ligger på en nivå ovanför antingen vena azygos eller carina trachealis, om bättre synlig.** Om kateterspetsen ligger i fel position måste den omplaceras och en ny kontroll utföras. **Viktigt: När det är svårt att synliggöra kateterspetsen på röntgen kan en liten mängd kontrastmedel injiceras för att underlätta positionsbestämning av spetsen.¹⁴**
32. Fyll i den självhäftande journaletiketten och för in den i patientjournalen. Journalför utvärderingar och införingsproceduren.
33. Kontrollera regelbundet kateterspetsens läge med hjälp av centimetermarkeringarna på katetern.

Heparinisering:

1. Koncentrationen på heparinlösningen kan varieras för att hålla patens i katetern. Användning av heparin och i såfall mängd och spolningsfrekvens, beror på läkarens val, sjukhusets/institutionens rutin, samt patientens tillstånd.^{3,8}
2. Volymen heparinlösning bör vara den samma eller något större än volymen i det lumen som ska läsas. Kateterns fyllningsvolym står tryckt på produktförpackningen.

Avlägsnande av katetern:

1. Ta bort förband och suturer (i förekommande fall). **Viktigt: Minska risken för att klippa av katetern genom att inte använda sax för att ta bort förbandet.**
2. Öppna StatLocks hållarvingar och ta loss katetern från StatLocks tappar (i förekommande fall).
3. Ta ut katetern genom att långsamt dra den parallellt med huden. **Viktigt: Minska risken för att katetern brister genom att inte forcera utdragningen om motstånd påträffas.** Om motstånd påträffas, applicera värme på området under 20-30 minuter.^{16,25} Börja varsamt dra katetern parallellt med huden. Om motstånd fortfarande förekommer måste en röntgenbild tas och läkare konsulteras.

4. Mät och inspektera katetern efter utdragningen för att vara säker på att katetern blivit uttagen i sin helhet.
5. Applicera en alkoholtork på StatLocks häftmedel och lyft varsamt bort kudden från huden (i förekommande fall).
6. Lägga förband på införingsstället.

7. Journalför kateteruttagning och borttagning av StatLock (i förekommande fall) i patientjournalen.


Arrow International, Inc. rekommenderar att användaren studerar referenslitteraturen.

*Om du har frågor eller önskar ytterligare referensinformation, kontakta Arrow International, Inc.



K-01351-133A (4/10)

ARROW[®]
INTERNATIONAL

2400 Bernville Road 
Reading, PA 19605 USA

1-800-523-8446

1-610-378-0131

8 a.m. - 8 p.m. EST

Teleflex Medical 

IDA Business and Technology Park
Athlone, Ireland