



ARROW® PICC⁺ with Chloragard® Technology



REF **CDA-44052-HPK1A**

5.5 Fr. | **2** Lumen | **40** cm catheter length | **.018** inch dia. spring-wire guide



Contents:

- 1: Two-Lumen Indwelling TaperFree™ CG⁺ Antimicrobial/Antithrombogenic Catheter¹: 5.5 Fr. x 40 cm Pressure Injectable Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, T-Port Connector, Extension Line Clamps, Contamination Guard and Placement Wire
- 1: GlideThru™ Peel-Away Sheath: 5.5 Fr. x 2-3/4" (7 cm) Radiopaque over 5.5 Fr. Dilator
- 1: Spring-Wire Guide, Nitinol, Marked: .018" (0.46 mm) dia. x 17-3/4" (45 cm) (Straight Soft Tip on One End - Straight Stiff Tip on Other) with Arrow Advancer
- 1: Injection Needle: Eclipse™² 25 Ga. x 1" (2.54 cm) RW
- 1: Safety Introducer Needle: Echogenic 21 Ga. x 2-3/4" (7 cm) TW
- 1: Introducer Needle: Echogenic 21 Ga. x 2-3/4" (7 cm) TW
- 1: Syringe: 10 mL Luer-Lock
- 1: Syringe: 3 mL Luer-Lock
- 2: Dust Cap: Non-Vented
- 1: SecondSite™ Adjustable Hub: Fastener
- 1: SecondSite™ Adjustable Hub: Catheter Clamp
- 1: SharpsAway® Disposal Cup
- 1: SharpsAway II™ Locking Disposal Cup
- 1: Catheter Trimmer
- 1: Towel: 24" x 36" (61 cm x 91 cm)
- 1: Drape: 60" x 76" (152 cm x 193 cm)
- 1: Drape: 36" x 41" with 3" x 5" fenestration
- 1: Towel
- 1: Filter: 5 Micron Straw

- 1: Safety Scalpel: #11
- 1: Patient ID Card
- 1: Patient Information Booklet
- 2: Paper Tape Measure
- 1: Tourniquet
- 10: Gauze Pad: 2" x 2" (5 cm x 5 cm)
- 10: Gauze Pad: 4" x 4" (10 cm x 10 cm)
- 1: Dressing: Tegaderm®³ 15.5 cm x 10 cm
- 1: Surgical Apparel: Impervious Gown
- 1: Dressing: STATLOCK®⁴ Catheter Stabilization Device
- 1: Surgical Apparel: Mask with Eye Shield
- 1: Surgical Apparel: Bouffant Cap
- 1: Surgical Apparel: Mask
- 1: Tape: Steri-Strip®³
- 1: HemoHopper® Fluid Receptacle

¹Licensed under US Patent Nos. 6,706,024; 6,872,195 and 7,329,412.
²A trademark of Becton, Dickinson and Company.
³A registered trademark of 3M Company.
⁴A registered trademark of C. R. Bard, Inc.

All components are CE 0086 unless otherwise noted.

Contraindications: Clinical assessment of the patient must be completed to ensure no contraindications exist. The Arrow® PICC with Chloragard® Technology is contraindicated in the following areas: • Patients with known hypersensitivity to chlorhexidine • In presence of device related infections • In presence of previous or current thrombosis in the intended vessel or along the catheterized vessel pathway.

The Pressure Injectable PICC is contraindicated wherever there is presence of device related infections or presence of thrombosis in the intended insertion vessel or catheter pathway. Clinical assessment of the patient must be completed to ensure no contraindications exist. See additional labeling for product specific contraindications.




Not made with natural rubber latex



Store below 25°C (77°F). Avoid excessive heat above 30°C (86°F).

- nl** **ARROW PICC met Chloragard-technologie** Bewaren beneden 25°C. Vermijd hitte hoger dan 30°C.
- fr** **PICC ARROW avec technologie Chloragard** Conservez le produit à une température inférieure à 25°C. Veillez à ne pas exposer le produit à une chaleur excessive supérieure à 30°C.
- de** **ARROW PICC mit Chloragard-Technologie** Unter 25°C lagern. Zu hohe Temperaturen über 30°C vermeiden.
- el** **Καθετήρας ARROW PICC με Τεχνολογία Chloragard** Φυλάσσεται κάτω των 25°C. Να αποφεύγεται η υπερβολική θερμότητα άνω των 30°C.
- it** **ARROW PICC con tecnologia Chloragard** Conservare ad una temperatura inferiore a 25°C. Evitare il calore eccessivo superiore a 30°C.
- pl** **Cewnik ARROW PICC z technologią Chloragard** Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed temperaturą powyżej 30°C.
- pt** **PICC ARROW com Tecnologia Chloragard** Conservar a temperaturas inferiores a 25°C. Evitar temperaturas superiores a 30°C.
- ru** **ARROW PICC с технологией Chloragard** Хранить при температуре ниже 25°C. Избегать нагрева свыше 30°C.
- es** **PICC de ARROW con tecnología Chloragard** Almacenar a temperaturas inferiores a 25°C. Evite temperaturas excesivas por encima de 30°C.
- sv** **ARROW PICC med Chloragard-teknologi** Förvaras vid temperatur under 25°C. Undvik höga temperatur över 30°C.
- tr** **Chloragard Teknolojili ARROW PICC** 25°C'ın altında saklayın. 30°C'ın üzerindeki aşırı ısıdan sakının.

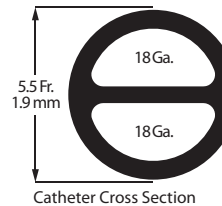

Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate† (mL/hr)	Pump Flow Rate‡ (mL/hr)	MAX Pressure Injection Flow Rate** (mL/sec)
Distal (18 Ga.)	0.41	500	3800	5
Proximal (18 Ga.)	0.43	520	3770	5

* Priming volumes are approximate and are done without accessories.
 † Flow rates were determined using room temperature water, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.
 ‡ Pump flow rates are determined at maximum pump pressure of 10 psig and represent approximate flow capabilities.
 ** Pressure injection flow rates are determined at the injector pressure setting of 300 psi maximum using media of 11.8 centipoise viscosity, with 152 cm pressure tubing.