



REF CU-25122-F

12 Fr. 2 Lumen 20 cm catheter length

.035 inch dia. spring-wire guide

You-Bend™ Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® ARROWg+ard Blue® Catheter for High Volume Infusions

Contents:

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter‡: 12 Fr. x 20 cm Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, ARROWg+ard® Antimicrobial Surface Treatment¹, Extension Line Clamps
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .035" (0.89 mm) dia. x 26-3/4" (68 cm) (Straight Soft Tip on One End - "J" Tip on Other) with Arrow Advancer
- 1: Catheter: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) Radiopaque over 20 Ga. RW Introducer Needle
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe: 5 mL
- 1: Tissue Dilator: 12 Fr. (4.0 mm) x 14 cm
- 2: Dust Cap: Non-Vented
- 1: Drape: 24" x 36" (61 cm x 91 cm)
- 1: Scalpel: #11

¹Licensed under US Patent No. 6,706,024.

All components are CE 0086 unless otherwise noted.

Rx only. Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

California Prop. 65

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm.

www.P65Warnings.ca.gov


‡MR Conditional

Not made with natural rubber latex. Store below 25°C (77°F). Avoid excessive heat above 40°C (104°F).

Fluid path components are non-pyrogenic.

Contraindications: The Arrow large-bore two-lumen catheter is not designed for long-term hemodialysis or for use in patients with thrombosed vessels. The Arrowg+ard Blue antimicrobial surface catheter is contraindicated for patients with known hypersensitivity to chlorhexidine, silver sulfadiazine, and/or sulfa drugs (refer to product instructions for references).

- fr** Jeu de cathétérisme pour hémodialyse à deux lumières You-Bend avec cathéter Blue FlexTip ARROWg+ard Blue pour les perfusions de grand volume
Contre-indications : Le cathéter à deux lumières de gros diamètre Arrow n'est pas conçu pour une hémodialyse de longue durée ni pour une utilisation chez des patients souffrant de thromboses vasculaires. Le cathéter à surface antimicrobienne Arrowg+ard Blue est contre-indiqué pour les patients qui présentent une hypersensibilité connue à la chlorhexidine, à la sulfadiazine d'argent et/ou aux sulfamides (consulter les instructions du produit pour références).
- de** Besteck für zweilumigen You-Bend-Hämodialysekatheter mit Blue-FlexTip-ARROWg+ard-Blue-Katheter für Infusionen großer Flüssigkeitsmengen
Kontraindikationen: Der doppel- und großlumige Katheter von Arrow ist nicht für die langzeitige Hämodialyse oder zur Verwendung bei Patienten mit thrombosierten Gefäßen geeignet. Der Katheter mit Arrowg+ard Blue antimikrobieller Oberfläche ist bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Chlorhexidin, Silber-Sulfadiazin und/oder Sulfa-Medikamenten kontraindiziert (Angaben siehe Produktanleitung).
- it** Set per caterismo in emodialisi a due lumi You-Bend con catetere Blue FlexTip ARROWg+ard Blue per volumi di infusione elevati
Controindicazioni - Il catetere a due lumi di ampio diametro Arrow non è indicato per l'emodialisi a lungo termine o per pazienti che presentano vasi trombizzati. Il catetere con superficie antimicrobica Arrowg+ard Blue è controindicato nei pazienti con ipersensibilità nota alla clorexidina, alla sulfadiazina argenticca e/o ai sulfamidici (per riferimenti, consultare le istruzioni dei prodotti).
- pl** Dwukanałowy zestaw You-Bend do hemodializy z cewnikiem Blue FlexTip ARROWg+ard Blue do przetaczania dużych objętości płynów infuzyjnych
Przeciwwskazania: Dwukanałowy cewnik o dużej średnicy Arrow nie jest przeznaczony do przewlekłej hemodializy ani do stosowania u pacjentów z zakrzepicą naczyń. Stosowanie cewnika przeciwbakteryjnego Arrowg+ard Blue jest przeciwwskazane u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na chlorheksydynę, sól srebrową sulfadiazyny i/lub sulfonamidów (odsyłacie do literatury znajdującej się w instrukcjach dotyczących produktu).
- pt** Conjunto de Cateterização para Hemodiálise You-Bend com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip, ARROWg+ard Blue, para Infusões de Grandes Volumes
Contra-indicações: O cateter de dois lúmenes e grande calibre Arrow não se destina a hemodiálise de longa duração nem a utilização em doentes com vasos trombados. O cateter com superfície antimicrobiana Arrowg+ard Blue está contraindicado em doentes com hipersensibilidade conhecida à clorexidina, à sulfadiazina de prata e/ou a fármacos sulfa (consulte as instruções do produto para obter referências).
- ru** Двухпросветный комплект для гемодиализной катетеризации You-Bend с катетером Blue FlexTip ARROWg+ard Blue для вливания больших объемов
Противопоказания. Катетер Arrow с двумя широкими просветами не предназначен для длительного гемодиализа или для использования у пациентов с тромбированными сосудами. Катетер с противомикробной поверхностью Arrowg+ard Blue противопоказан пациентам с известной гиперчувствительностью к хлоргексидину, сульфадиазину серебра и/или сульфамидным лекарственным препаратам (см. инструкцию к изделию).
- sl** Komplet za hemodializno katetrizacijo You-Bend z dvema svetlinama s katetrom Blue FlexTip ARROWg+ard Blue za infundiranje velike prostornine
Kontraindikacije: Kateter Arrow z dvema svetlinama in velikimi odprtini ni zasnovan za dolgotrajno hemodializo ali za uporabo pri bolnikih s tromboznimi žilami. Kateter z antimikrobno površino Arrowg+ard Blue je kontraindiciran za bolnike z znano preobčutljivostjo na klorheksidin, srebrvo sulfadiazin in/ali zdravila s sulfonamidi (glejte navodila za uporabo).
- es** Conjunto de cateterización de dos luces para hemodiálisis You-Bend con catéter Blue FlexTip ARROWg+ard Blue para infusiones de gran volumen
Contraindicaciones: El catéter de doble luz y gran diámetro interior Arrow no ha sido diseñado para la hemodiálisis a largo plazo ni para ser utilizado en pacientes con vasos trombados. El catéter con superficie antimicrobiana Arrowg+ard Blue está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a la clorhexidina, la sulfadiazina de plata o las sulfamidas (consulte la bibliografía en las instrucciones del producto).
- sv** You-Bend set för tvåkanalig hemodialyskatetrering med Blue FlexTip ARROWg+ard Blue-kateter för infusioner med hög volym
Kontraindikationer: Arrow grov tvåkanalig kateter är inte avsedd för hemodialys under längre tid eller för användning hos patienter med trombotiserade kärl. Arrowg+ard Blue kateter med antibakteriell yta är kontraindicerad för patienter med känd överkänslighet mot klorhexidin, silversulfadiazin och/eller sulfaläkemedel (se bruksanvisningen för referenser).
- tr** You-Bend İki Lümenli Hemodializ Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip ARROWg+ard Blue Kateterli, Yüksek Hacimli İnfüzyonlar İçin
Kontrendikasyonlar: Arrow büyük açıklıklı iki lümenli kateter uzun dönemli hemodializ için veya trombozlu damarları olan hastalarda kullanım için tasarlanmamıştır. Arrowg+ard Blue antimikrobiyel yüzey kateteri klorheksidin, gümüş sülfadiazin ve/veya sulfa ilaçlarına bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir (referanslar için ürün talimatına başvurun).

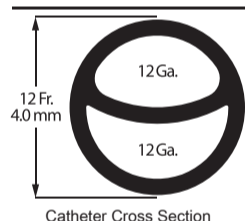

Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate† (mL/min)	Venous Pressure Setting (mmHg)
Distal (12 Ga.)	1.80	200	100
		340	200
Proximal (12 Ga.)	1.70	200	100
		340	200

* Priming volumes are approximate and are done without accessories.
† Blood flow rates are approximate and were determined by varying the venous pressure setting from 100 to 200 mmHg in an in vitro experiment using blood analog solution.



Arrow International, Inc.
Subsidiary of Teleflex Incorporated
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA



LBL016020 (09/19)



REF CU-25122-F

12 Fr. 2 Lumen 20 cm catheter length

.035 inch dia. spring-wire guide

You-Bend™ Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® ARROWg+ard Blue® Catheter for High Volume Infusions

