



Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions

REF **CS-15122-F**

12 Fr. | **2** Lumen | **20** cm catheter length | **.035** inch dia. spring-wire guide

Contents:

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter: 12 Fr. x 20 cm Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Extension Line Clamps
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .035" (0.89 mm) dia. x 26-3/4" (68 cm) (Straight Soft Tip on One End - "J" Tip on Other) with Arrow Advancer
- 1: Catheter: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) Radiopaque over 20 Ga. RW Introducer Needle
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe: 5 mL
- 1: Tissue Dilator: 12 Fr. (4.0 mm) x 14 cm
- 2: Dust Cap: Non-Vented
- 1: Drape: 24" x 36" (61 cm x 91 cm)
- 1: Scalpel: #11


All components are CE 0086 unless otherwise noted.

Rx only. **Warning: Read all package insert warnings, cautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.**

Fluid path components are non-pyrogenic.

Contraindications: The large-bore two-lumen catheter is not designed for long-term hemodialysis or for use in patients with thrombosed vessels.


- fr** **Jeu de cathétérisme pour hémodialyse à deux lumières avec cathéter Blue FlexTip pour les perfusions de grand volume** Contre-indications : Le cathéter à deux lumières de gros diamètre n'est pas conçu pour une hémodialyse à long terme ni pour une utilisation chez des patients souffrant de thromboses vasculaires.
- de** **Besteck für zweilumigen Hämodialysekatheter mit Blue-FlexTip-Katheter für Infusionen großer Flüssigkeitsmengen** Kontraindikationen: Der doppel- und großlumige Katheter ist nicht für die langzeitige Hämodialyse oder zur Verwendung bei Patienten mit thrombosierte Gefäßen geeignet.
- it** **Set per cateterismo a due lumi in emodialisi con catetere Blue FlexTip per volumi di infusione elevati** Controindicazioni - Il catetere a due lumi di ampio diametro non è progettato per emodialisi a lungo termine o per pazienti che presentano vasi trombizzati.
- pl** **Dwukanałowy zestaw cewnika do hemodializy z cewnikiem Blue FlexTip do przetaczania dużych objętości płynów infuzyjnych** Przeciwwskazania: Dwukanałowy cewnik o dużej średnicy nie jest przeznaczony do przewlekłej hemodializy ani do stosowania u pacjentów z zakrzepicą w naczyniach.
- pt** **Conjunto de Cateterização para Hemodiálise com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip, para Infusões de Grandes Volumes** Contra-indicações: O cateter de grande calibre e lúmen duplo não foi concebido para hemodiálise a longo prazo nem para utilização em doentes que apresentem vasos com trombos.
- ru** **Двухпросветный комплект для гемодиализной катетеризации с катетером Blue FlexTip для вливания больших объемов** Противопоказания. Катетер с двумя широкими просветами не предназначен для длительного гемодиализа или для использования у пациентов с тромбированными сосудами.
- sl** **Komplet za hemodializno katetizacijo z dvema svetlinama s katetrom Blue FlexTip za infundiranje velike prostornine** Kontraindikacije: Kateter z dvema svetlinama in velikimi luknjami ni zasnovan za dolgoročno hemodializo ali za uporabo pri bolnikih s tromboznimi žilami.
- es** **Conjunto de cateterización de dos luces para hemodiálisis con catéter Blue FlexTip para infusiones de gran volumen** Contraindicaciones: El catéter de doble luz y gran diámetro interior no se ha diseñado para la hemodiálisis a largo plazo ni para ser utilizado en pacientes con vasos trombosados.
- sv** **Set för tvåkanalig hemodialyskatetrering med Blue FlexTip-kateter för infusioner med hög volym** Kontraindikationer: Den grova tvåkanaliga katetern är inte avsedd för hemodialys under längre tid eller för användning hos patienter med trombotiserade kärl.
- tr** **İki Lümenli Hemodiyaliz Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip Kateterli, Yüksek Hacimli İnfüzyonlar için** Kontrendikasyonlar: Büyük açıklıklı iki lümenli kateter uzun dönemli hemodiyaliz veya trombozlu damarları olan hastalarda kullanım için tasarlanmamıştır.

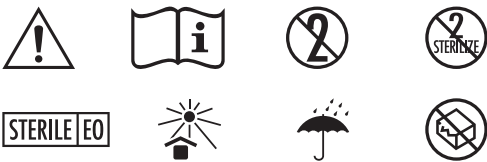

LATEX
Not made with natural rubber latex

Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate† (mL/min)	Venous Pressure Setting (mmHg)
Distal (12 Ga.)	1.60	200	100
		340	200
Proximal (12 Ga.)	1.50	200	100
		340	200

* Priming volumes are approximate and are done without accessories.
† Blood flow rates are approximate and were determined by varying the venous pressure setting from 100 to 200 mmHg in an in vitro experiment using blood analog solution.

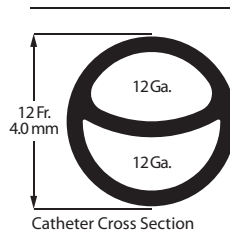

Manufacturer:
Arrow International, Inc.
Subsidiary of Teleflex Incorporated
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland

teleflex®
www.teleflex.com

IS-15122-140A (06/18)



Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions

REF **CS-15122-F**

12 Fr. | **2** Lumen | **20** cm catheter length | **.035** inch dia. spring-wire guide