

Antimicrobial surfaces utilizing chlorhexidine acetate and silver sulfadiazine

REF ES-24402

Pediatric Two-Lumen Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® ARROWgard Blue® Catheter

ARROW®

Contents:

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter: 4 Fr. x 5-1/8" (13 cm) Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, ARROWgard® Antimicrobial Surface Treatment¹, Extension Line Clamps, Injection Site Caps
- 1: Spring-Wire Guide: .018" (0.46 mm) dia. x 17-3/4" (45 cm) (Straight Soft Tip on Both Ends)
- 1: Introducer Needle: 22 Ga. x 1.05" (2.67 cm) TW
- 1: Syringe: 3 mL Luer-Slip
- 2: Tissue Dilators
- 1: Clamp: Catheter
- 1: Fastener: Catheter Clamp

¹ Licensed under US Patent No. 6,706,024.

Indications For Use:

- Provides central venous access.
- Provides protection against catheter related infection.
- 4 Fr. antimicrobial catheter should be used in pediatric patients weighing 2.0 kg or greater.

Rx only.

Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Contraindications: The ARROWgard Blue® antimicrobial catheter is contraindicated for patients with known hypersensitivity to chlorhexidine, silver sulfadiazine, and/or sulfa drugs (refer to product instructions for references).

Sterile. Single use – do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide. Do not use if package has been previously opened or damaged. Does not contain natural rubber latex. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication.

Store below 25°C (77°F).
Avoid excessive heat above 40°C (104°F).




Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Athlone, Ireland



- FR** Jeu de cathétérisme veineux central pédiatrique à deux lumières avec cathéter Blue FlexTip ARROWgard Blue
Conservez le produit à une température inférieure à 25°C. Veillez à ne pas exposer le produit à une chaleur excessive supérieure à 40°C.
- DE** Besteck für zweilumigen, zentralen Venenkatheter für Kinder mit Blue-FlexTip-ARROWgard-Blue-Katheter
Unter 25°C lagern. Zu hohe Temperaturen über 40°C vermeiden.
- IT** Set per cateterismo della vena centrale a due lumi pediatrico con catetere Blue FlexTip ARROWgard Blue
Conservare ad una temperatura inferiore a 25°C. Evitare il calore eccessivo superiore a 40°C.
- PL** Dwukanałowy zestaw pediatryczny do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem Blue FlexTip ARROWgard Blue
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed temperaturą powyżej 40°C.
- PT** Conjunto Pediátrico de Cateterização Venosa Central com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip, ARROWgard Blue
Conservar a temperaturas inferiores a 25°C. Evitar temperaturas superiores a 40°C.
- RU** Педиатрический комплект для катетеризации главных вен с двухпросветным катетером Blue FlexTip ARROWgard Blue
Хранить при температуре ниже 25°C. Избегать нагрева свыше 40°C.
- SL** Pediatrični komplet za centralno venko katetrizacijo z dvema svetlinama s katetrom Blue FlexTip ARROWgard Blue
Shranjujte pod 25°C. Izogibajte se prekomerni vročini nad 40°C.
- ES** Conjunto de cateterización venosa central de dos luces para uso pediátrico con catéter Blue FlexTip ARROWgard Blue
Almacenar a temperaturas inferiores a 25°C. Evite temperaturas excesivas por encima de 40°C.
- Set för pediatrisk tvåkanalig central venkatetrisering med Blue FlexTip ARROWgard Blue-kateter**
Förvaras vid temperatur under 25°C. Undvik hög temperatur över 40°C.
- Pediyatrik İki Lümenli Santral Venöz Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip ARROWgard Blue Kateter ile**
25°C'ın altında saklayın. 40°C'ın üzerindeki aşım ısıdan sakının.

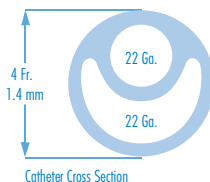

Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate† (mL/hr)
Distal (22 Ga.)	0.27	620
Proximal (22 Ga.)	0.32	460

*Priming volumes are approximate and are done without the injection cap. Injection cap priming volume is 0.17 mL.

†Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.

IS24402:131B (9/11)



REF ES-24402

4 Fr.

2 Lumen

13 cm catheter length

.018 inch dia. spring-wire guide

Peel to Open

Pediatric Two-Lumen Central Venous Catheterization Set with ARROWgard Blue® Catheter