



## Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® ARROWgard Blue® Catheter for High Volume Infusions

REF **CS-25142-F**

**14** Fr. | **2** Lumen | **20** cm catheter length | **.038** inch dia. spring-wire guide

**Contents:**

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter: 14 Fr. x 20 cm Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, ARROWgard® Antimicrobial Surface Treatment<sup>1</sup>, Extension Line Clamps
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .038" (0.97 mm) dia. x 27-1/2" (70 cm) (Straight Soft Tip on One End - "J" Tip on Other) with Arrow Advancer
- 1: Catheter: 16 Ga. x 1-7/8" (4.8 cm) Radiopaque over 19 Ga. TW Introducer Needle
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe: 5 mL
- 1: Tissue Dilator: 14 Fr. (4.7 mm) x 14 cm
- 1: Tissue Dilator: 16 Fr. (5.3 mm) x 11.4 cm
- 2: Dust Cap: Non-Vented
- 1: Drape: 24" x 36" (61 cm x 91 cm)
- 1: Scalpel: #11

<sup>1</sup>Licensed under US Patent No. 6,706,024.

**All components are CE 0086 unless otherwise noted.**

Rx only. **Warning: Read all package insert warnings, cautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.**

**California Prop. 65**  
**Warning: Cancer and Reproductive Harm**  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Fluid path components are non-pyrogenic.

**Contraindications: The Arrow large-bore two-lumen catheter is not designed for long-term hemodialysis or for use in patients with thrombosed vessels.**


**The ARROWgard Blue antimicrobial surface catheter is contraindicated for patients with known hypersensitivity to chlorhexidine, silver sulfadiazine, and/or sulfa drugs (refer to product instructions for references).**



**LATEX**  
Not made with natural rubber latex

Store below 25°C (77°F).  
Avoid excessive heat above 40°C (104°F).

- fr** **Jeu de cathétérisme pour hémodialyse à deux lumières avec cathéter Blue FlexTip ARROWgard Blue pour les perfusions de grand volume** Contre-indications : Le cathéter à deux lumières de gros diamètre Arrow n'est pas conçu pour une hémodialyse à long terme ni pour une utilisation chez des patients souffrant de thromboses vasculaires. Le cathéter à surface antimicrobienne ARROWgard Blue est contre-indiqué pour les patients qui présentent une hypersensibilité à la chlorhexidine, à la sulfadiazine d'argent et/ou aux médicaments sulfa (consulter les instructions du produit pour références).
- de** **Besteck für zweilumigen Hämodialysekatheter mit Blue-FlexTip-ARROWgard-Blue-Katheter für Infusionen großer Flüssigkeitsmengen** Kontraindikationen: Der doppel- und großlumige Katheter von Arrow ist nicht für die langzeitige Hämodialyse oder zur Verwendung bei Patienten mit thrombosierten Gefäßen geeignet. Der Katheter mit ARROWgard Blue antimikrobieller Oberfläche ist bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Chlorhexidin, Silber-Sulfadiazin und/oder Sulfa-Medikamenten kontraindiziert (Angaben siehe Produktanleitung).
- it** **Set per cateterismo a due lumi in emodialisi con catetere Blue FlexTip ARROWgard Blue per volumi di infusione elevati** Controindicazioni - Il catetere Arrow a due lumi di ampio diametro non è progettato per emodialisi a lungo termine o per pazienti che presentano vasi trombizzati. Il catetere con superficie antimicrobica ARROWgard Blue è controindicato nei pazienti con ipersensibilità nota alla clorexidina, alla sulfadiazina argintica e/o ai sulfamidici (per riferimenti, consultare le istruzioni dei prodotti).
- pl** **Dwukanałowy zestaw do hemodializy z cewnikiem Blue FlexTip ARROWgard Blue do przetaczania dużych objętości płynów infuzyjnych** Przeciwwskazania: Dwukanałowy cewnik o dużej średnicy Arrow nie jest przeznaczony do przewlekłej hemodializy ani do stosowania u pacjentów z zakrzepicą naczyń. Stosowanie cewnika przeciwbakteryjnego ARROWgard Blue jest przeciwwskazane u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na chlorheksydyne, sól srebrową sulfadiazyny i/lub sulfonamidy (patrz odsyłacze w instrukcjach dotyczących produktu).
- pt** **Conjunto de Cateterização para Hemodiálise com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip, ARROWgard Blue, para Infusões de Grandes Volumes** Contra-Indicações: O cateter de grande calibre e lúmen duplo Arrow não se destina a hemodiálise prolongada nem a utilização em doentes com vasos com trombos. A utilização do cateter com superfície antimicrobiana ARROWgard Blue está contra-indicada em doentes com hipersensibilidade conhecida à clorexidina, à sulfadiazina de prata e/ou a fármacos sulfa (consulte as instruções do produto para obter referências).
- ru** **Двухпросветный комплект для гемодиализной катетеризации с катетером Blue FlexTip ARROWgard Blue для вливания больших объемов** Противопоказания. Катетер Arrow с двумя широкими просветами не предназначен для длительного гемодиализа или для использования у пациентов с тромбированными сосудами. Катетер с противомикробной поверхностью ARROWgard Blue противопоказан пациентам с известной гиперчувствительностью к хлоргексидину, сульфадиазину серебра и/или сульфамидным лекарственным препаратам (см. инструкцию к изделию).
- sl** **Komplet za hemodializo katetризациjo z dvema svetlinama s katetrom Blue FlexTip ARROWgard Blue za infundiranje velike prostornine** Kontraindikacije: Kateter Arrow z dvema svetlinama in velikimi odprtini ni zasnovan za dolgoročno hemodializo ali za uporabo pri bolnikih s tromboznimi žilami. Kateter s protimikrobno površino ARROWgard Blue je kontraindiciran za bolnike z znano preobčutljivostjo na klorheksidin, srebrov sulfadiazin in/ali zdravila s sulfonamidi (za reference glejte navodila za uporabo).
- es** **Conjunto de cateterización de dos luces para hemodiálisis con catéter Blue FlexTip ARROWgard Blue para infusiones de gran volumen** Contraindicaciones: El catéter de doble luz y gran diámetro interior Arrow no ha sido diseñado para la hemodiálisis a largo plazo ni para ser utilizado en pacientes con vasos trombados. El catéter con superficie antibiótica ARROWgard Blue está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a la clorhexidina, la sulfadiazina de plata y/o las sulfamidas (consulte la bibliografía en las instrucciones del producto).
- sv** **Set för tvåkanalig hemodialyskatetrering med Blue FlexTip ARROWgard Blue-kateter för infusioner med hög volym** Kontraindikationer: Arrow grov tvåkanalig kateter är inte avsedd för hemodialys under längre tid eller för användning hos patienter med trombotiserade kärl. ARROWgard Blue kateter med antimikrobiell yta är kontraindicerad för patienter med känd överkänslighet mot klorhexidin, silversulfadiazin och/eller sulfaläkemedel (se bruksanvisningen för referenser).
- tr** **İki Lümenli Hemodializ Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip ARROWgard Blue Kateter ile, Yüksek Hacimli İnfüzyonlar için** Kontrendikasyonlar: Arrow büyük açıklıklı iki lümenli kateter uzun dönemli hemodializ veya trombozlu damarları olan hastalarda kullanım için tasarlanmamıştır. ARROWgard Blue antimikrobiyel yüzey kateteri klorheksidin, gümüş sülfadiazin ve/veya sulfa ilaçlarına bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir (referanslar için ürün talimatına başvurun).

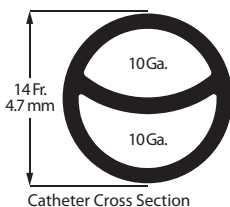

Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate† (mL/min)	Venous Pressure Setting (mmHg)
Distal (10 Ga.)	1.70	250 400	100 170
Proximal (10 Ga.)	1.50	250 400	120 190

\* Priming volumes are approximate and are done without accessories.  
† Venous Pressure settings are approximate and were determined by varying the blood flow rates from 250 to 400 mL/min in an in vitro experiment using blood analog solution.

Manufacturer:  
Arrow International, Inc.  
Subsidiary of Teleflex Incorporated  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA



IS-25142-140A (05/18)



## Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® ARROWgard Blue® Catheter for High Volume Infusions

REF **CS-25142-F**

**14** Fr. | **2** Lumen | **20** cm catheter length | **.038** inch dia. spring-wire guide